

Tekniset tiedot

Terveydenhuollon ja tutkimuksen kylmälaitteet



Tekniset tiedot

Festivo MED lääkejääkaapit

Kaapeissa käytetään energiatehokasta ja ympäristöystävällistä R600 kylmäainetta.

Kaapin turvahälytykset varmistavat lämpötilaherkkien tuotteiden säilytyksen.

Puhaltimella tehostettu ilmankierto takaa tasaisen säilytyslämpötilan.

Kaapin muotoilua ja rakennetta on uudistettu sekä ulko- että sisäpuolelta ja sen avulla on saavutettu suurempi ja entistä paremmin hyödynnettävä kylmäsäilytystila.

Mallistoa on laajennettu ja kaapin saa umpioven lisäksi myös lasi-ikkunallisella ovella.

Uutena lisätarvikkeena on muovinen vetolaatikko-järjestelmä. Mallista riippuen kaappiin mahtuu 2-8 vetolaatikkoo. Kaapin varustukseen kuuluvat myös lasi-ovihihly-yhdistelmä tai ruostumattomat teräshyllyt.

Lisävarusteena saa LED sisävalon.

Kaikki pinnat ovat helposti puhdistettavia.

S-MED 80 ja 200 kylmäkaapin ylä- tai alapuolelle voi yhdistää lukittavan lääkekaapin huonelämpötilassa säilytettäville tuotteilla.

Lukkovaihtoehtoina ovat Assa, Abloy, iLOQ ja Ruko. Lukko on kiinnitetty käytännölliselle korkeudelle kaapin yläreunaan.



Ominaisuudet

- Ohjausyksikkö, jossa on selkeä numeronäyttö lämpötilalle ja muille toiminnoille
- Näppäinlukitus
- Minimi- ja maksimilämpötilan tallennus
- Optinen ja akustinen ylä- ja alalämpötilahälytys
- Ovikytin puhaltimen ohjaukselle sekä ovi auki -hälytykselle
- Hälytys rikkoutuneesta anturista
- Valmius RS485 sovitteelle tietokoneiliitäntää varten
- Puhaltimella tehostettu ilmankierto
- Muotiin valettu ympäristöystävällinen polyuretaanieristeinen runko, eristepaksuus 50mm
- Ulkopinta on näkyviltä osiltaan valkoista POES-pintaista kuumasinkittyä teräslevyä
- Sisäpinnat ovat polystyreenimuovia ja osittain valkoista POES-pintaista kuumasinkittyä teräslevyä
- Lasihihlyjen säätöväli on 36 mm ja ovesta on helposti irrotettavat ovihihlyt
- Abloy lukko on kiinnitetty käytännölliselle korkeudelle kaapin yläreunaan
- Itsesulkeutuvassa ovesta on tukeva valettu vedin, magneettitiivist ja kestävät saranat. Ovi pysyy auki 90 asteen kulmassa

- Kaapin sisälle asennettava hygieninen vesisäiliö, johon kertyy kylmäpatterin pintaan tiivistynyt vesi
- Kaapeissa on energiatehokas ja ympäristöystävällinen R600 kylmäaineella toimiva kylmäkoneisto
- Sähköliitäntä 230V / 50/60Hz

Lisävarusteet

- Muovinen vetolaatikko, jossa on väljakajia
- Ruostumattomat teräshyllyt
- Ovi, jossa on suuri lasi-ikkuna
- Kuumakaasuhaihdutusjärjestelmä, joka haihduttaa kylmäpatterin pintaan tiivistyneen veden
- LED valo
- Kaapin sisälle asennettava hygieninen vesisäiliö, johon kertyy kylmäpatterin pintaan tiivistynyt vesi
- Lukkovaihtoehdot: Assa, iLOQ, Ruko
- Potentiaalivapaa kytkentäpaikka hälytyksille
- Läpivienti lisäanturille
- Putkijalusta h=180mm
- Ohjausyksikkö ja varustepaketti, jolla kaapin vakio-ominaisuudet voi täydentää DIN 58345 vaatimusten mukaiseksi

Tekniset tiedot

Festivo MED lääkejääkaapit



- Energiatehokas ja ympäristöystävällinen kylmäkoneisto
- Puhaltimella tehostettu ilmankierto
- Turvahälytyksillä varmistettu kylmäkoneisto
- Ohjausyksikkö, jossa on selkeä numeronäyttö lämpötilalle ja muille toiminnoille
- Lukko on kiinnitetty käytännölliselle korkeudelle kaapin yläreunaan
- Itsesulkeutuva ovi pysyy auki 90 asteen kulmassa
- LED valo (lisävaruste)

Tekniset tiedot

Festivo MED lääkejääkaapit

Festivo MED			80	120	200	160/160	
						YLÄOSA	ALAOSA
Ulkomitat	Leveys	mm	595	595	595	595	
	Syvyys	mm	510	510	510	510	
Lattia-/pöytämalli	Korkeus	mm	725	900	1300	2000	
Pöytätason alle sijoitettava malli * **	Korkeus	mm	870	870	-	-	
Seinään tai kalusteisiin sijoitettava malli **	Korkeus	mm	750	920	-	-	
Sisämitat	Leveys	mm	475	475	475	475	
	Syvyys	mm	305 / 205	305 / 205	305 / 205	305	305 / 205
	Korkeus	mm	470 / 390	630 / 550	1045 / 965	825	820 / 740
Tilavuus	Netto	litra	53	73	127	197	
	Brutto	litra	75	103	176	293	
Paino	Netto	kg	47	54	69	104	
Pakkauksen paino	Brutto	kg	50	58	74	109	
Pakkauksen mitat	Leveys		680	680	680	680	
	Syvyys		600	600	600	600	
	Korkeus		920	1070	1470	2170	
Ympäristön lämpötila		°C	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32	
Lämpötila-alue		°C	+2...+15	+2...+15	+2...+15	+2...+15	
Kylmäaine	R600	g	42	50	55	2 x 50	
Liitântäteho		W	50	50	50	100	
Sulake	Hidas	A	10	10	10	10	
Jännite		V	230/ 50/60 Hz	230/ 50/60 Hz	230/ 50/60 Hz	230/ 50/60 Hz	
Sulatus 1. Ilma 2. Kuumakaasu 3. Sähkö			3	3	3	3	
HYLLYT JA VETOLAATIKOT							
Lasihylly Määrä vakio/maksimi • leveys 470 mm, syvyys 175 mm		kpl	2/3	3/4	5/8	4/6	4/6
Ovihylly Määrä vakio/maksimi **** • leveys 425 mm, syvyys 90 mm		kpl	2	3	4	4	4
TAI							
Ruostumaton teräshylly Määrä vakio/maksimi • leveys 475 mm, syvyys 260 mm		kpl	2/3	3/4	5/8	4/6	4/6
TAI							
Vetolaatikat **** Määrä vakio/maksimi • leveys 460 mm, syvyys 253 mm		kpl	2/3	3/4	5/8	2/4 ***	4/6

* Kalusteasennuksissa työtasoon pitää tehdä kaapin takareunan kohdalle ilmankiertoaukko tai kaapin päälle pitää jättää ilmankiertotila, josta lauhdeilma pääsee vapaasti ympäristöön. Katso lisäohjeet tuotteen teknisistä tiedoista.

** Pöytätason alle ja seinään tai kalusteisiin sijoitettavan mallin ulkokatto on sinkittyä teräslevyä.


*** 160/160 yläosa: vetolaatikoiden kanssa toimitetaan aina vakiona 2 kpl lasihyllyjä (leveys 470 mm, syvyys 254 mm)

**** Kylmäkaappiin ei saa ovihylly-vetolaatikko-yhdistelmää

Tekniset tiedot

Festivo MED lääkejääkaapit


Festivo MED 80

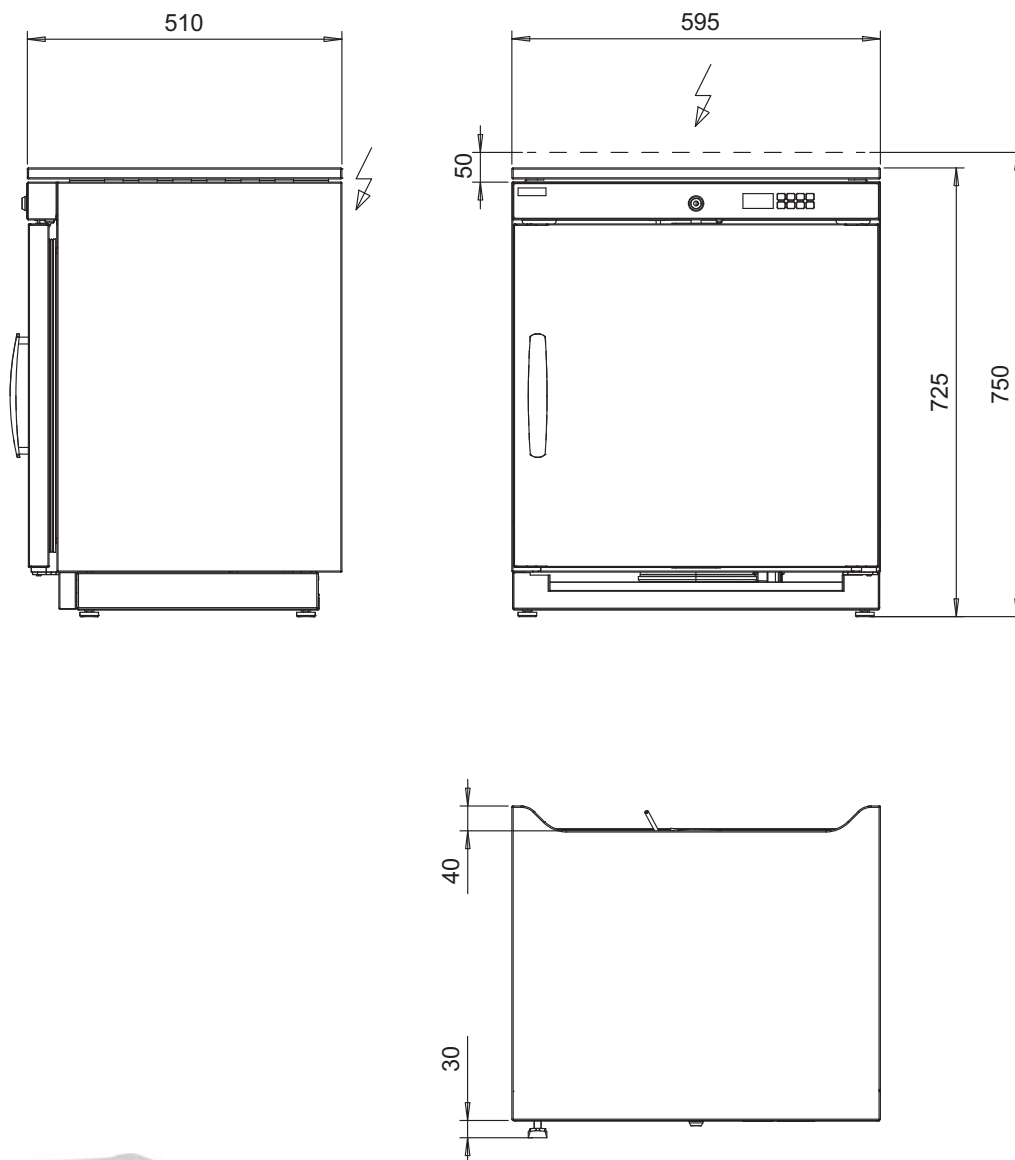

Tekniset tiedot

Festivo MED lääkejäakaapit


Festivo MED 80

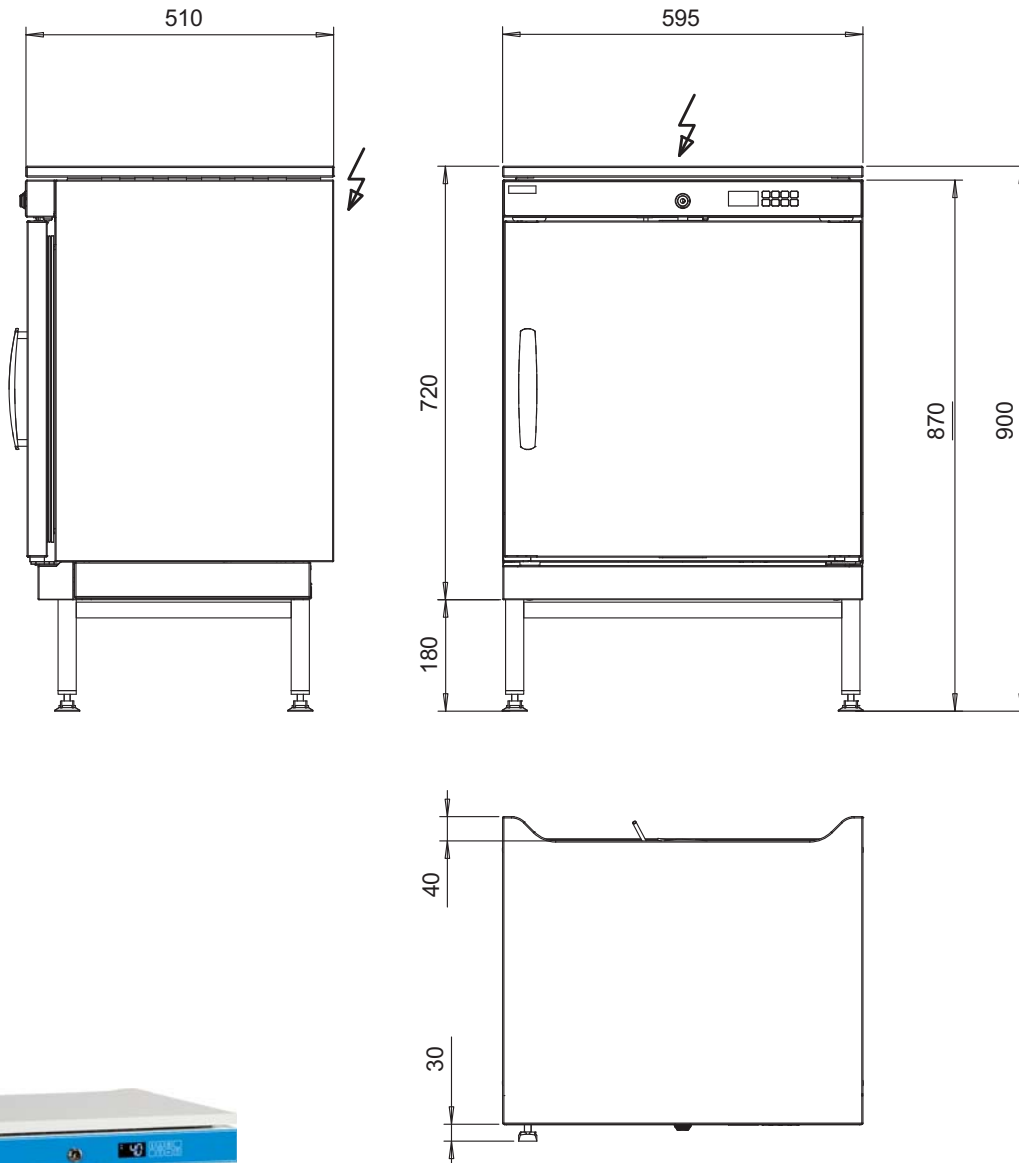

Tekniset tiedot

Festivo MED lääkejääkaapit



Festivo MED 120

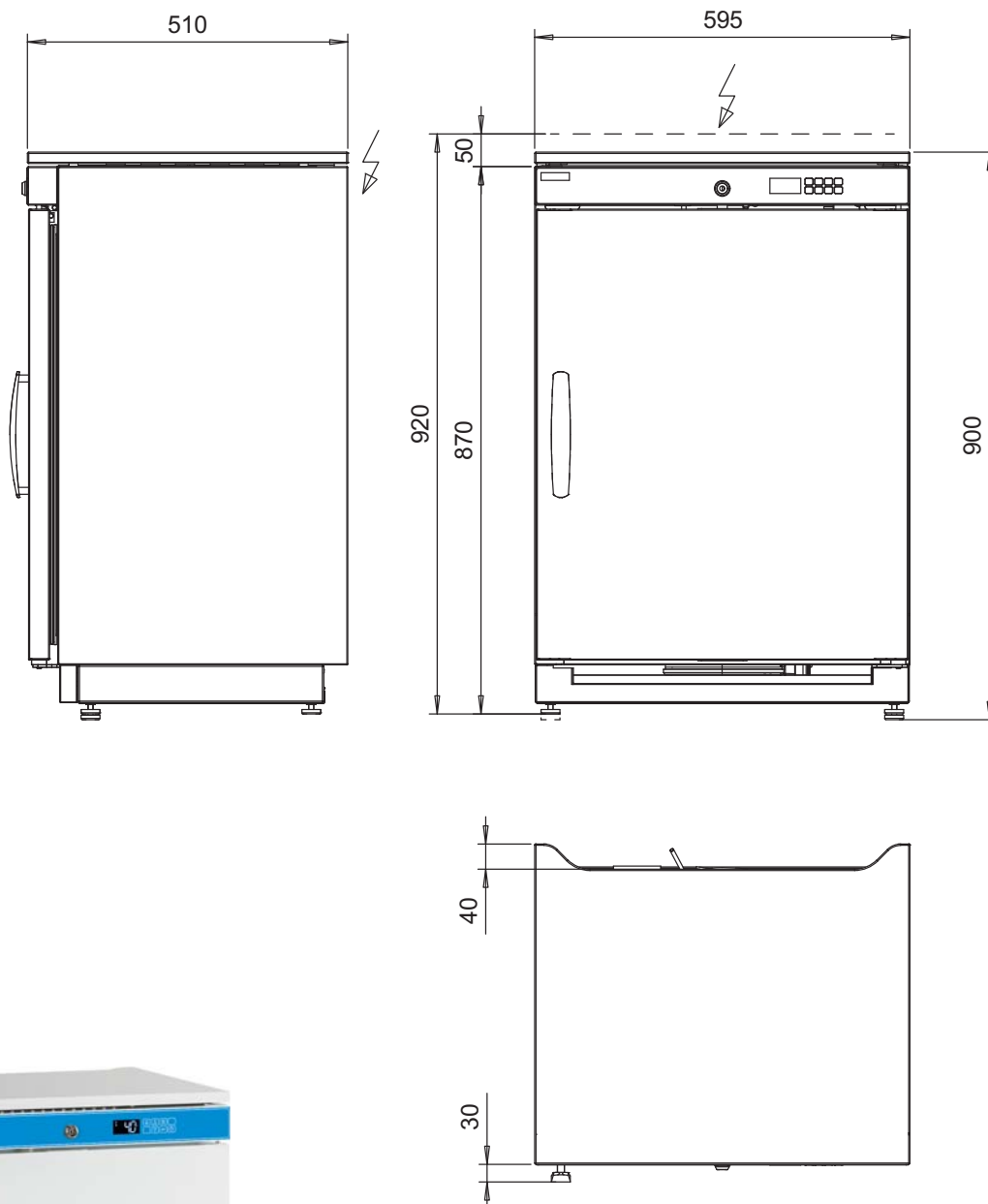

Tekniset tiedot

Festivo MED lääkejääkaapit




Festivo MED 200

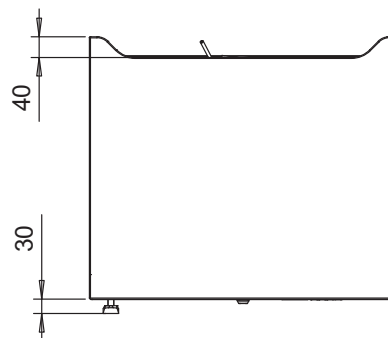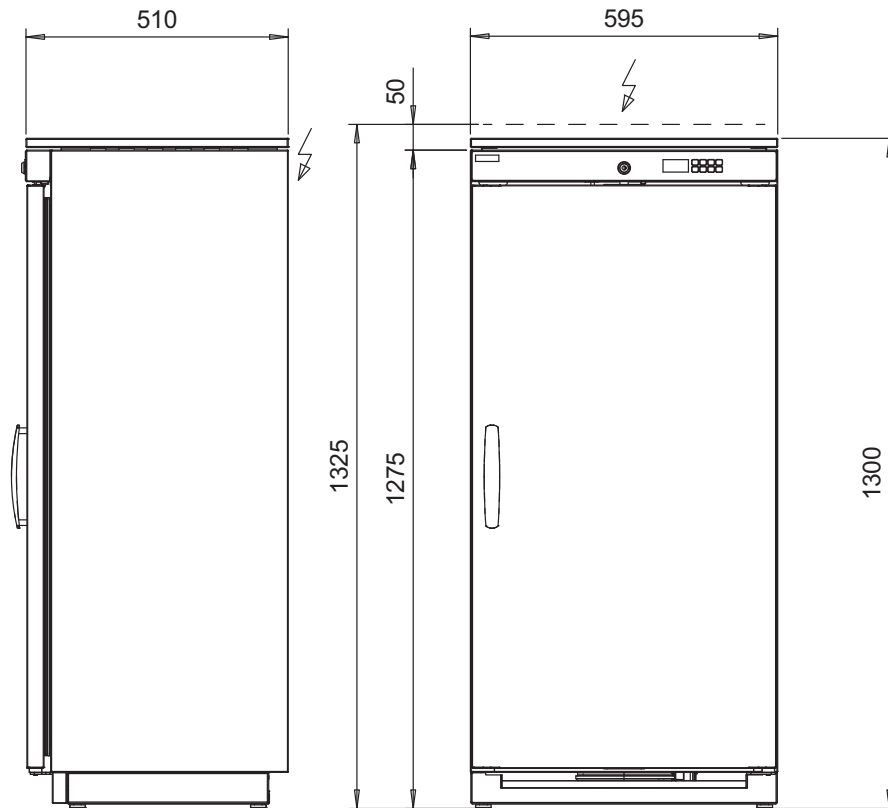

Tekniset tiedot

Festivo MED lääkejääkaapit

Festivo MED 160/160

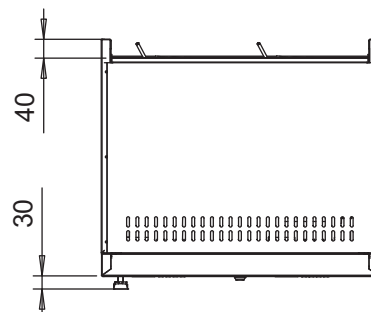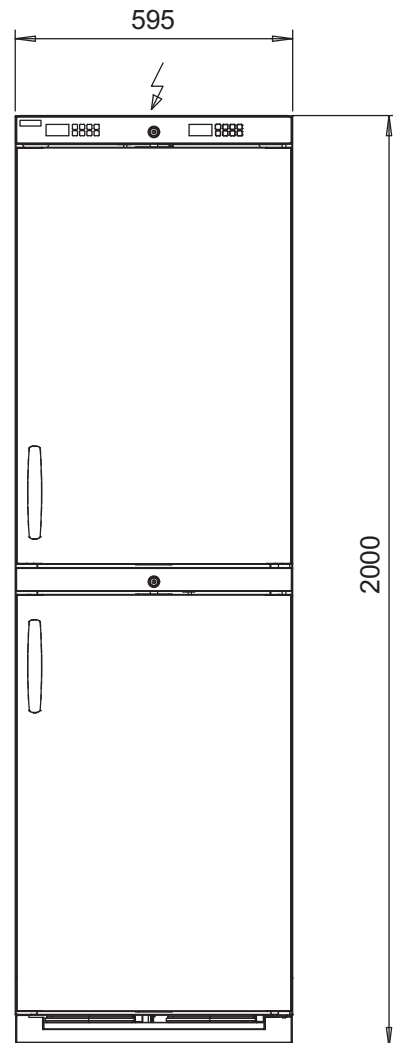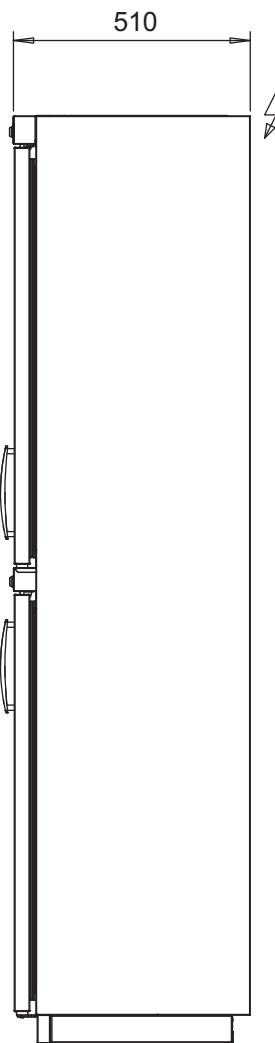

Tekniset tiedot

Festivo MED lasiovelliset lääkejääkaapit



- Energiatehokas ja ympäristöystävällinen kylmäkoneisto
- Puhaltimella tehostettu ilmankierto
- Turvahälytyksillä varmistettu kylmäkoneisto
- Ohjausyksikkö, jossa on selkeä numeronäyttö lämpötilalle ja muille toiminnoille
- Lukko on kiinnitetty käytännölliselle korkeudelle kaapin yläreunaan
- Itsesulkeutuva ovi pysyy auki 90 asteen kulmassa
- LED valo vakiona

Tekniset tiedot

Festivo MED lasiovelliset lääkejääkaapit

Festivo MED			80 GD	120 GD	200 GD	160/160 GD	
						YLÄOSA	ALAOSA
Ulkomitat	Leveys	mm	595	595	595	595	
	Syvyys	mm	510	510	510	510	
Lattia-/pöytämalli	Korkeus	mm	725	900	1300	2000	
Pöytätason alle sijoitettava malli * **	Korkeus	mm	870	870	-	-	
Seinään tai kalusteisiin sijoitettava malli **	Korkeus	mm	750	920	-	-	
Sisämitat	Leveys	mm	475	475	475	475	
	Syvyys	mm	305 / 205	305 / 205	305 / 205	305	305/ 205
	Korkeus	mm	470 / 390	630 / 550	1045 / 965	825	820 / 740
Tilavuus	Brutto	litra	53	73	127	197	
			75	103	176	293	
Paino	Netto	kg	49	56	71	108	
Pakkauksen paino	Brutto	kg	52	60	76	109	
Pakkauksen mitat	Leveys		680	680	680	680	
	Syvyys		600	600	600	600	
	Korkeus		920	1070	1470	2170	
Ympäristön lämpötila		°C	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32	
Lämpötila-alue		°C	+2...+15	+2...+15	+2...+15	+2...+15	
Kylmäaine	R600	g	42	50	55	2 x 50	
Liitäntäteho		W	62	62	62	124	
Sulake	Hidas	A	10	10	10	10	
Jännite		V	230/ 50/60 Hz	230/ 50/60 Hz	230/ 50/60 Hz	230/ 50/60 Hz	
Sulatus 1. Ilma 2. Kuumakaasu 3. Sähkö			3	3	3	3	
HYLLYT JA VETOLAATIKOT							
Lasihylly Määrä vakio/maksimi • leveys 470 mm, syvyys 175 mm		kpl	2/3	3/4	5/8	4/6	4/6
TAI							
Ruostumaton teräshylly Määrä vakio/maksimi • leveys 475 mm, syvyys 260 mm		kpl	2/3	3/4	5/8	4/6	4/6
TAI							
Vetolaatikot Määrä vakio/maksimi • leveys 460 mm, syvyys 253 mm		kpl	2/3	3/4	5/8	2/4 ***	4/6

* Kalusteasennuksissa työtasoon pitää tehdä kaapin takareunan kohdalle ilmankiertoaukko tai kaapin päälle pitää jättää ilmankiertotila, josta lauhdeilma pääsee vapaasti ympäristöön. Katso lisäohjeet tuotteen teknisistä tiedoista.


** Pöytätason alle ja seinään tai kalusteisiin sijoitettavan mallin kansilevy on sinkittyä teräslevyä.

*** 160/160 yläosa: vetolaatikoiden kanssa toimitetaan aina vakiona 2 kpl lasihyllyjä (leveys 470 mm, syvyys 254 mm)

Tekniset tiedot

Festivo MED lasiovelliset lääkejääkaapit


Festivo MED 80 GD

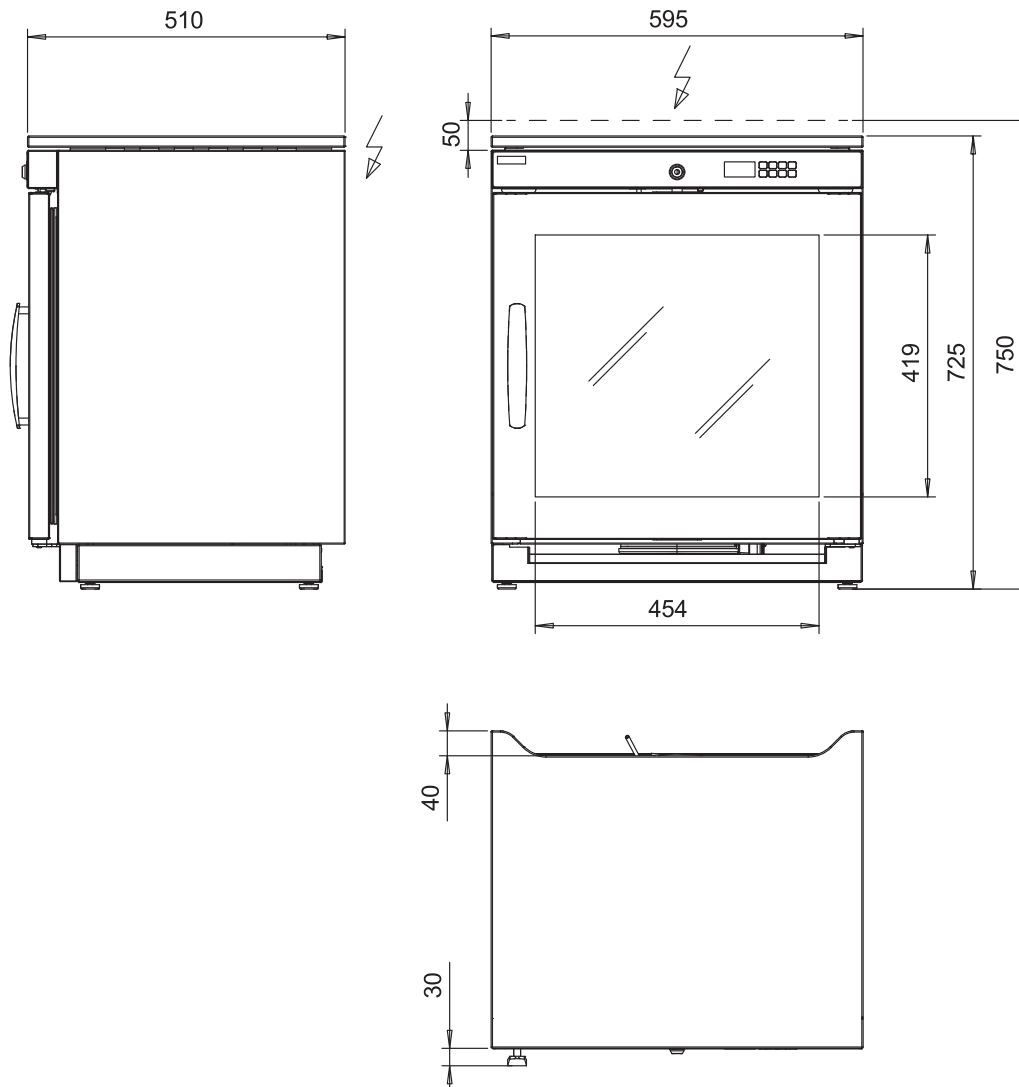

Tekniset tiedot

Festivo MED lasiovelliset lääkejääkaapit


Festivo MED 80 GD

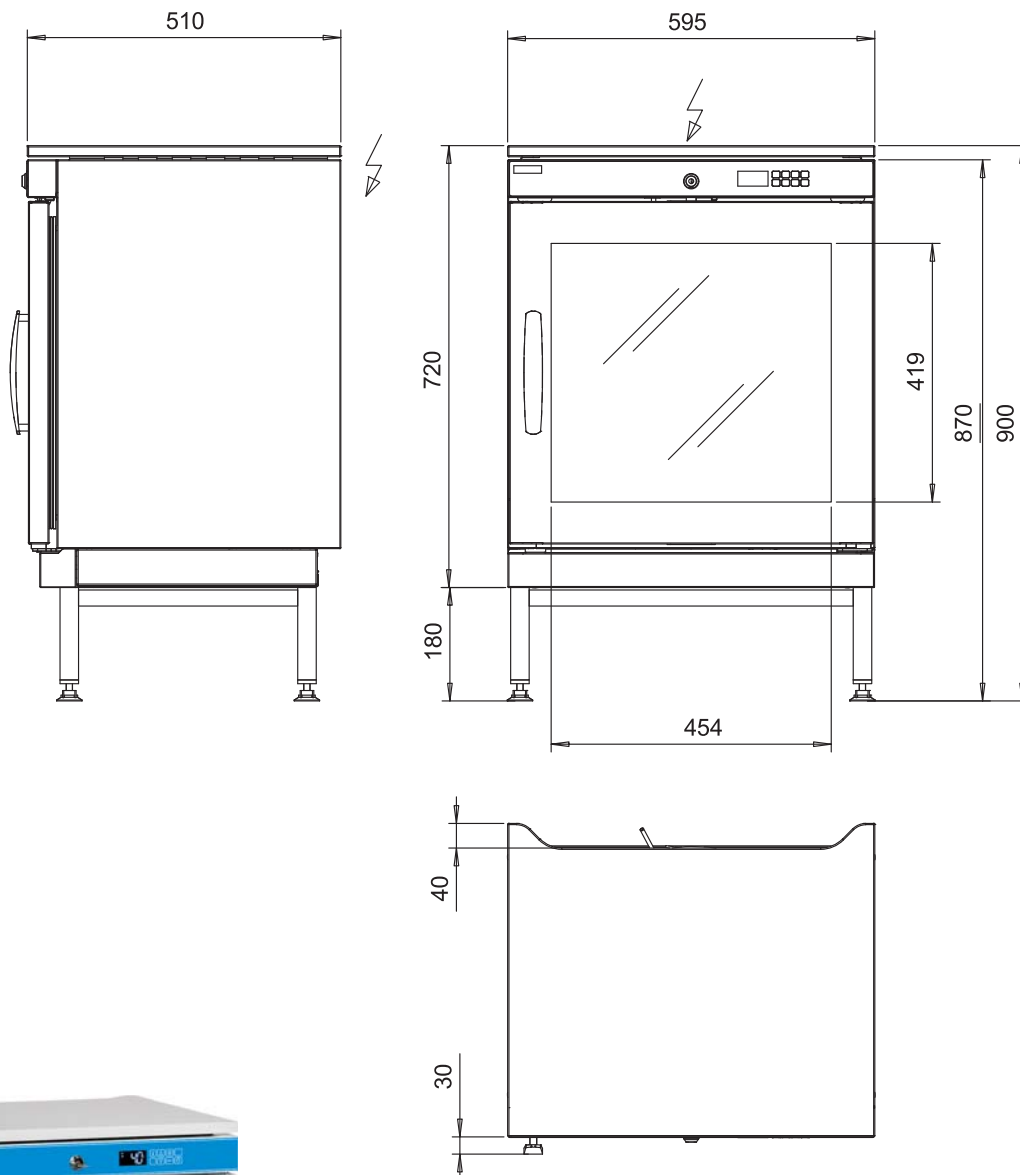

Tekniset tiedot

Festivo MED lasiovelliset lääkejääkaapit


Festivo MED 120 GD

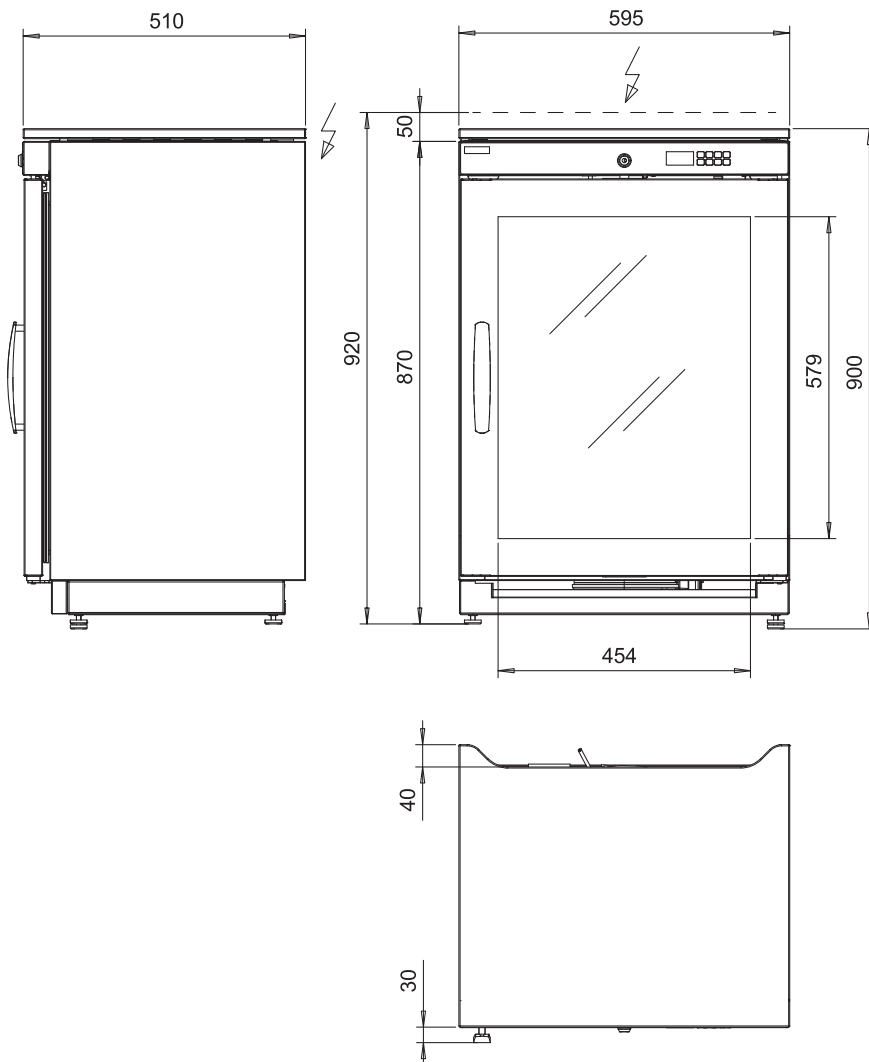

Tekniset tiedot

Festivo MED lasiovelliset lääkejääkaapit




Festivo MED 200 GD

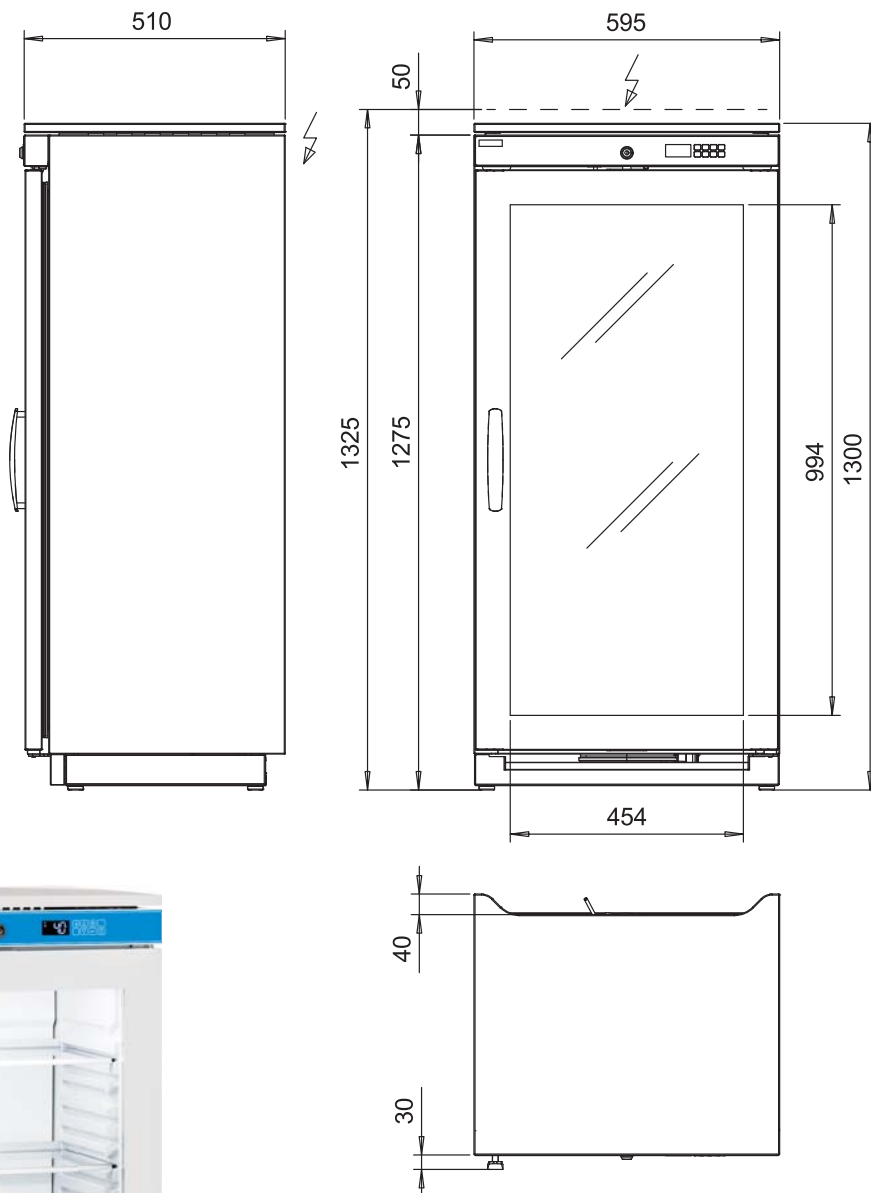

Tekniset tiedot

Festivo MED lasiovelliset lääkejääkaapit


Festivo MED 160/160 GD

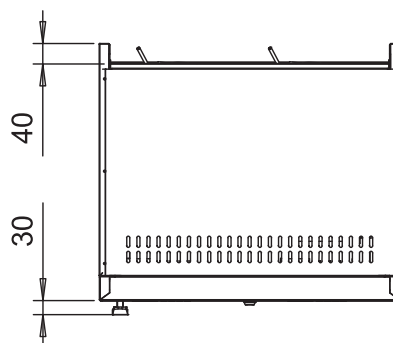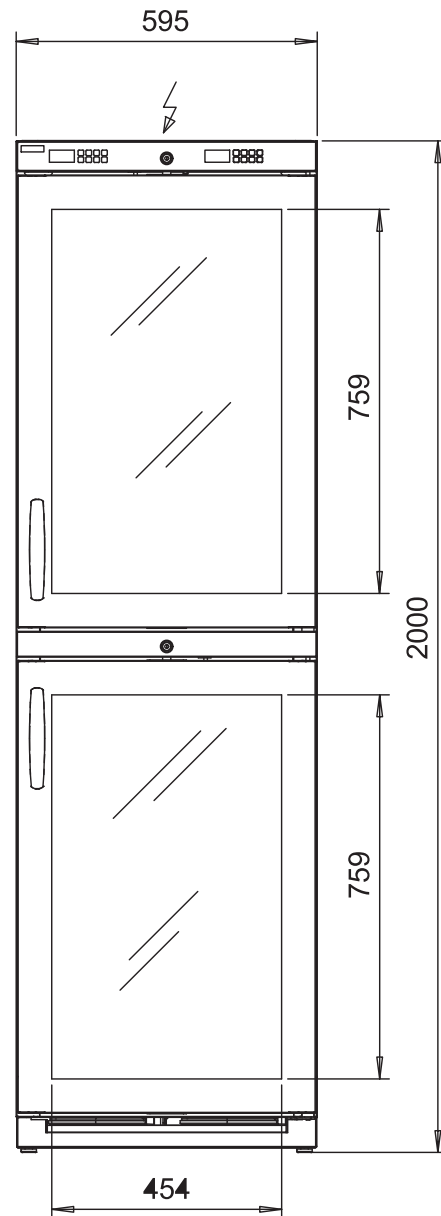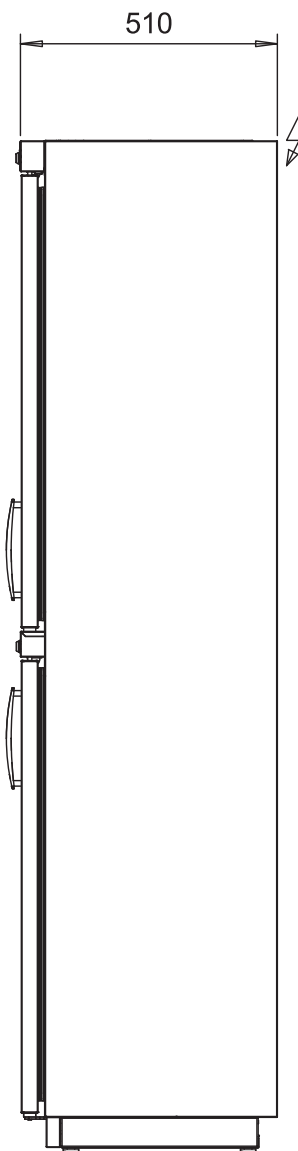


Tekniset tiedot

Festivo MED lääkejääkaapit

* Pöytätason alle ja kalusteisiin sijoitettava malli

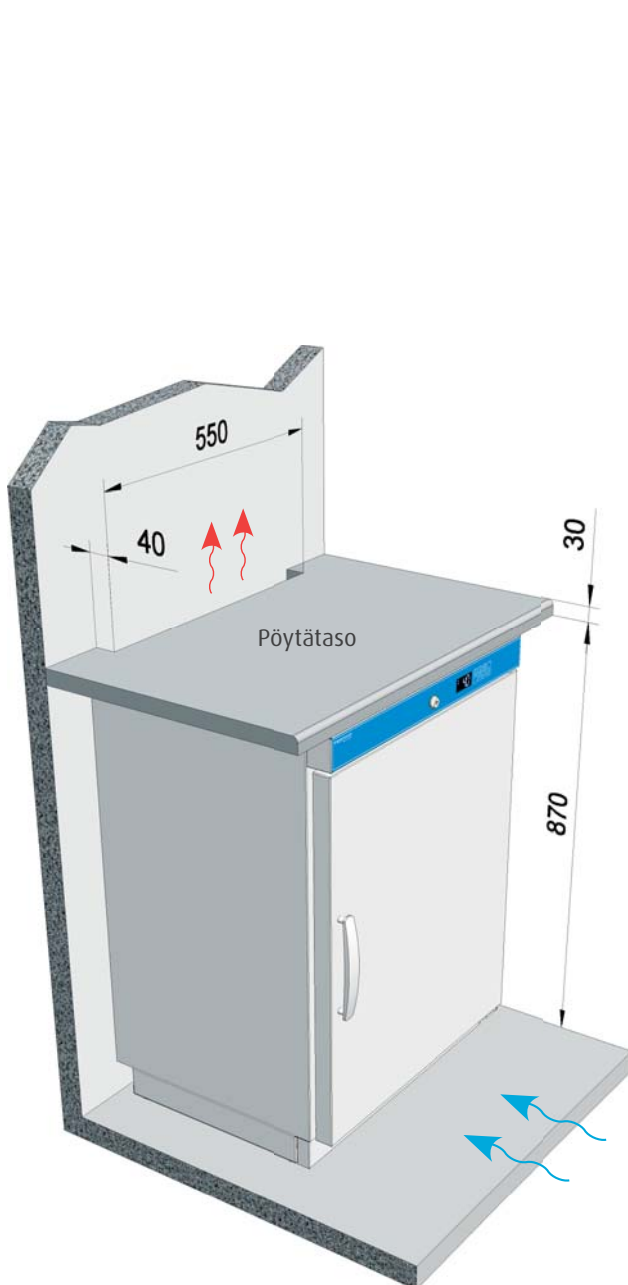

Asennus pöytätason alle

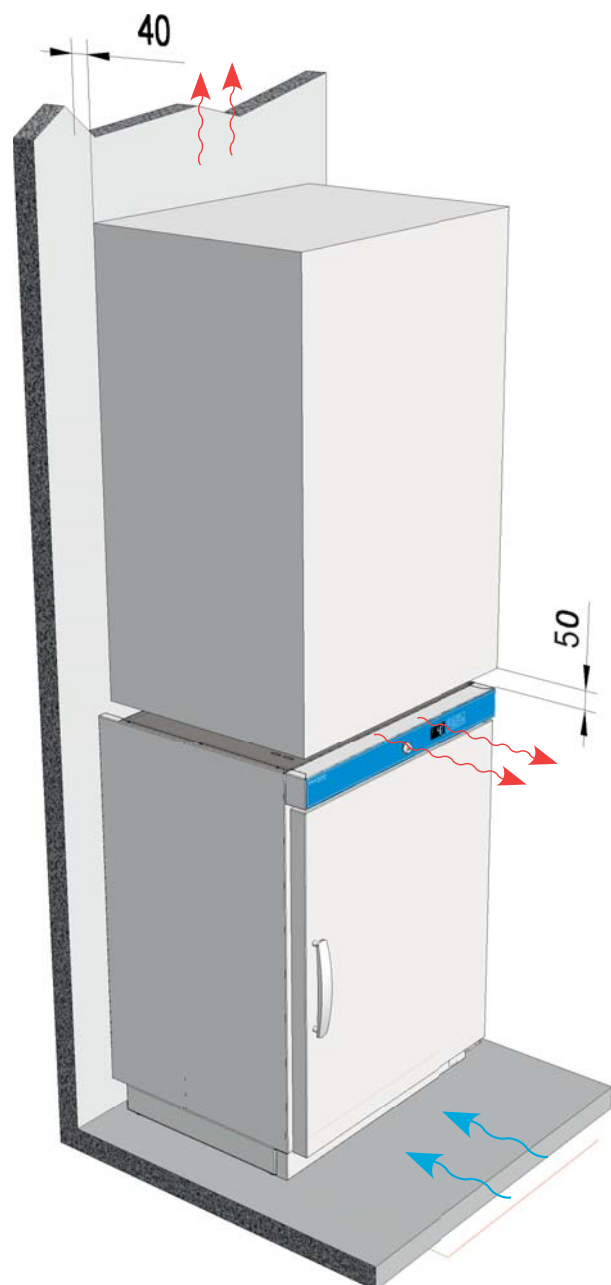


Asennus seinään tai kalusteisiin

Tekniset tiedot

Festivo MED lääkejääkaapit


Vetolaatikko

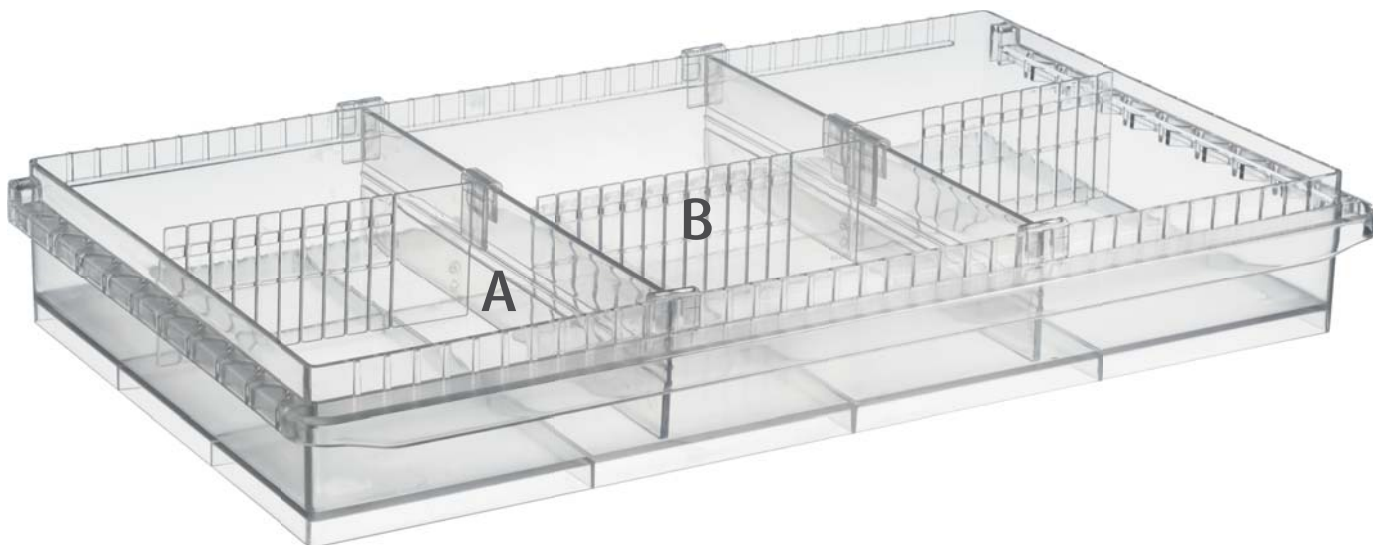

Vetolaatikossa on vakiona:

A (koodi KK2371) 2 kappaletta


B (koodi KK2372) 3 kappaletta

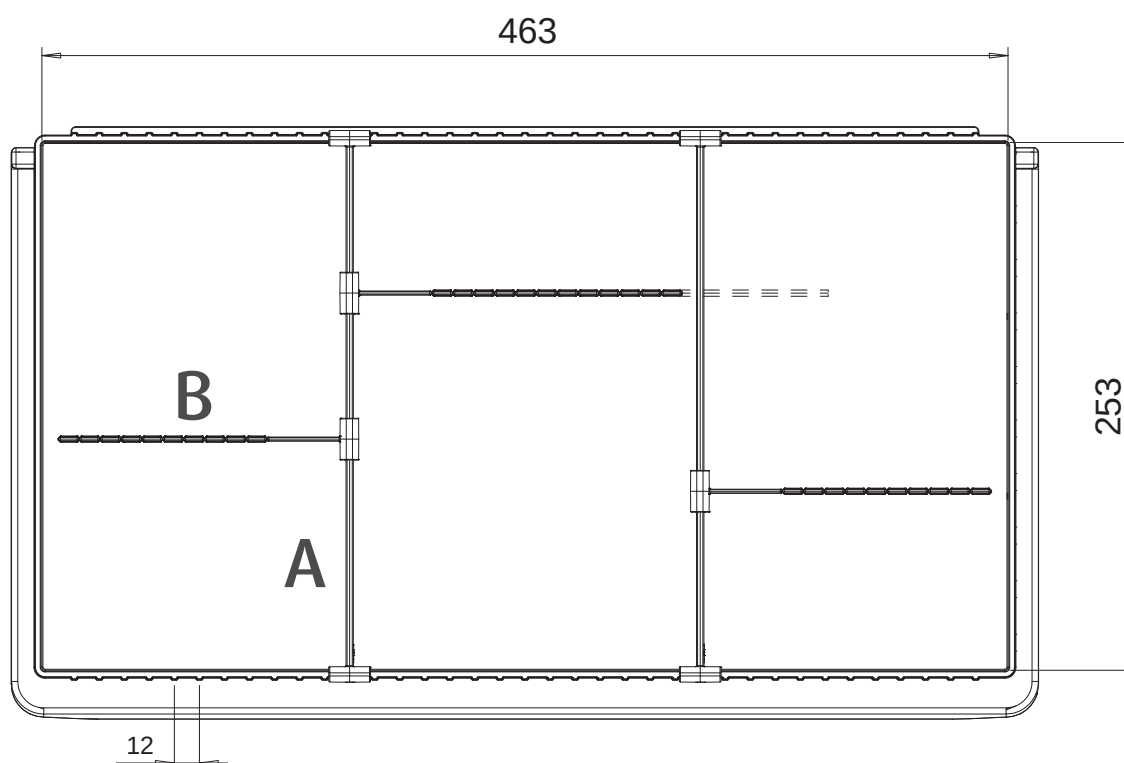

Tekniset tiedot


Festivo MED lääkejäakaapit

Ovihylly

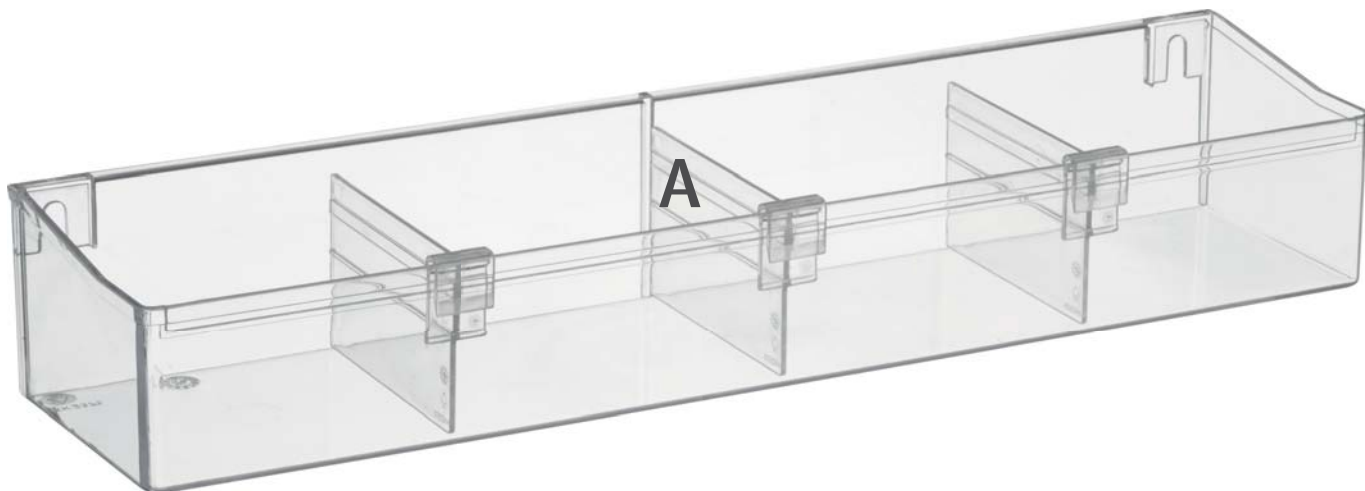

Ovihyllyssä on vakiona:

3 kappaletta A (koodi KK2376)

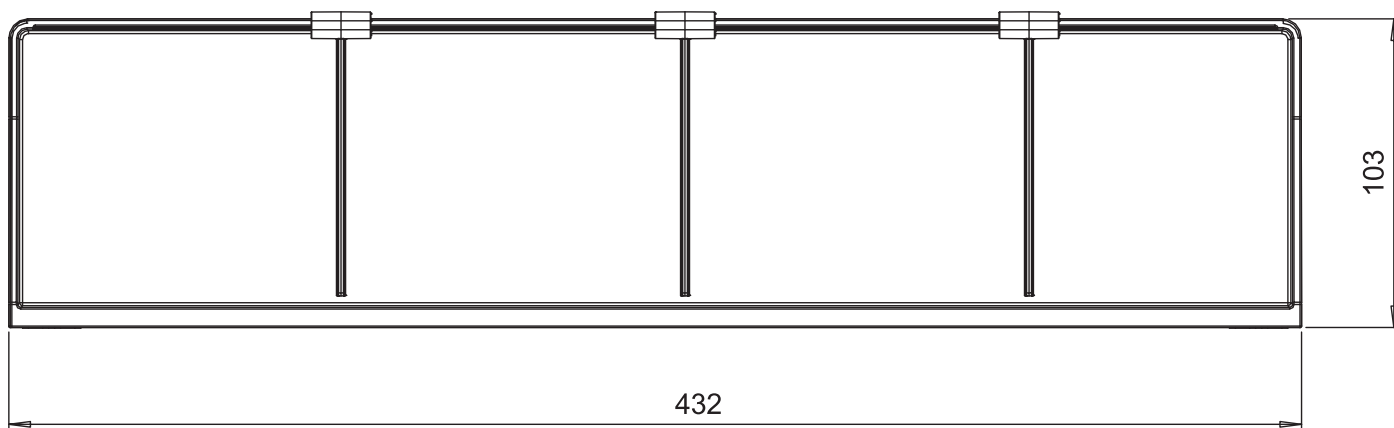

Tekniset tiedot

S-MED yhdistelmä lääkekaapit / lääkejääkaapit

Laaja valikoima kaappeja ja laatikostoja erityisesti vastaanottojen, sairaaloiden ja terveydenhuollon laitosten tarpeisiin. Helposti puhdistettavat lukolliset kaapit ja laatikostot ovat ihanteellinen ratkaisu lääkkeiden säilyttämiseen.



Ominaisuudet

- Lääkekaapit ovat kestäväää ja helposti puhdistettavaa melamiinilevyä
- Lukittavat ovet ja tukeva metallivedin
- Vakiolukkona Abloy CL103
- Vakiona lasihyllyt
- ovihyllyt kestäväää muovia, soveltuvat hyvin lääkkeiden säilytykseen. Ovihyllyissä säädettävät välijakajat
- M1 kaapeissa on lääketarjotin säädettävillä välijakajilla
- M1 kaapeissa on narkoottisten aineiden lokero, jossa on erillissarjoitettu lukko
- M1-kaapin LED-valaisin syttyy ja sammuu automaattisesti ovikytkimen avulla
- Lääkekaapit saa joko teräs- tai lasihyllyillä tai läpinäkyvillä muovisilla vetolaatikoilla
- Yhdistelmäkaapeissa on tukeva putkijalusta, jonka korkeus on 180mm

Lisävarusteet

- Lukkovaihtoehtoina ovat Assa tai iLOQ
- LED valo
- Läpinäkyvä muovinen vetolaatikko, jossa on säädettävät välijakajat

Tekniset tiedot

S-MED yhdistelmä lääkekaapit / lääkejääkaapit



- Lääkekaappien ulkopinta on kestävä ja helposti puhdistettavaa melamiinilevyä
- Lukittavat ovet ja laatikostot
- Ovihyllyt vakiona kaikissa lääkekaappimalleissa
- M1 kaapeissa on narkoottisten aineiden lokero ja lääketarjotin säädettävillä väljakajilla
- LED valo
- Lasihyllyt tai läpinäkyvät muoviset vetolaatikot
- Tukeva putkijalusta säätöjaloilla

Tekniset tiedot

S-MED yhdistelmä lääkekaapit / lääkejääkaapit


Festivo MED			M1 + NK3		M1 + VL6		M1
			M1	NK3	M1	VL6	
Ulkomitat	Leveys	mm	595		595		595
	Syvyys	mm	510		510		510
	Korkeus	mm	2000		2000		1100
Sisämitat	Leveys	mm	475	475	475	475	475
	Syvyys	mm	429	429	429	429	429
	Korkeus	mm	1064	684	1064	684	1064
Tilavuus	Netto	litra	166	91	166	91	166
	Brutto	litra	207	148	207	148	207
Paino	Netto	kg	94		94		54
Pakkauksen paino	Brutto	kg	99		99		59
Pakkauksen mitat	Leveys		680		680		680
	Syvyys		600		600		600
	Korkeus		2170		2170		1270
Liitântäteho		W	12	-	12	-	12
Sulake	Hidas	A	10	10	10	10	10
Jännite		V	230 / 50/60 Hz		230 / 50/60 Hz		230 / 50/60 Hz
HYLLYT JA VETOLAATIKOT							
Lasihylly (vakio/maksimi) • leveys 475 mm, syvyys 254 mm		kpl	4/5 *	3/6	4/5 *	N/A	4/5 *
TAI							
Vetolaatikot (vakio/maksimi) • sivu 17, leveys 460 mm, syvyys 253 mm		kpl	4/5 *	N/A	4/5 *	6/6	4/5 *
JA							
Ovihylly vakiona • sivu 18, leveys 425 mm, syvyys 90 mm		kpl	4	2	4	2	4

* Huom! Narkoottisten aineiden N-lokeron tilalle voi valita 3 lasihyllyä tai vetolaatikkoa.

Tekniset tiedot

S-MED yhdistelmä lääkekaapit / lääkejääkaapit

M1 + NK3, M1 + VL6

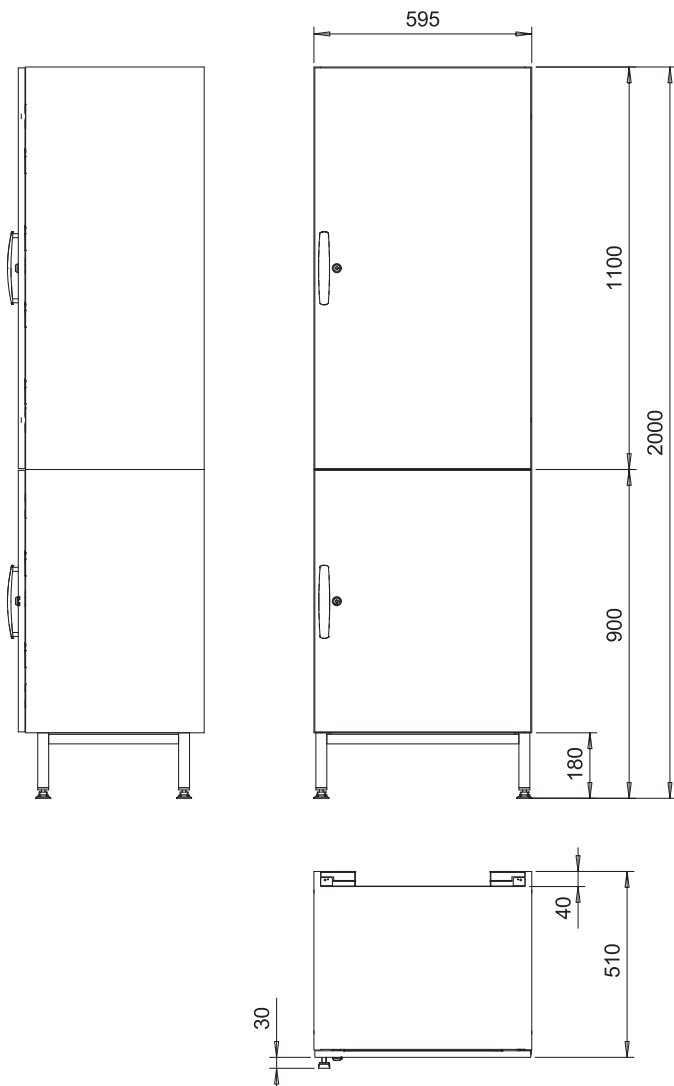

Festivo MED M1 + NK3



Festivo MED M1 + VL6

Festivo MED M1 Narkoottisten aineiden lokero ja lääketarjotin

Tekniset tiedot

S-MED yhdistelmä lääkekaapit / lääkejääkaapit

Laaja valikoima pöytämalleista suuriin jääkaappeihin näyttönoton, sairaaloiden ja leikkaussalien tarpeisiin.



Ominaisuudet

- Lääkejääkaappien tiedot alkavat sivulta 2
- Lääkekaapit ovat kestäväää ja helposti puhdistettavaa melamiinilevyä
- Lukittavat ovet ja tukeva metallivedin
- Vakiolukkona Abloy CL103
- Vakiona lasihyllyt
- ovihyllyt kestäväää muovia, soveltuvat hyvin lääkkeiden säilytykseen. Ovihiilyissä säädettävät välijakajat
- M1 kaapeissa on lääketarjotin säädettävillä välijakajilla
- M1 kaapeissa on narkoottisten aineiden lokero, jossa on erillissarjoitettu lukko
- M1-kaapin LED-valaisin syttyy ja sammuu automaattisesti ovikytkimen avulla
- Lääkekaapit saa joko teräs- tai lasihyllyillä tai läpinäkyvillä muovisilla vetolaatikoilla
- Yhdistelmäkaapeissa on tukeva putkijalusta, jonka korkeus on 180mm

Lisävarusteet

- M1 kaappi voi olla liitettynä S-MED 80 lääkejääkaapin ylä- tai alapuolelle
- NK2/VL4 kaapin voi olla liitettynä S-MED 200 lääkejääkaapin ylä- tai alapuolelle
- Lukkovaihtoehtoina ovat Assa tai iLOQ
- LED valo
- Läpinäkyvä muovinen vetolaatikko, jossa on säädettävät välijakajat

Tekniset tiedot

S-MED yhdistelmälääkekaapit / lääkejääkaapit



- Lääkekaappien ulkopinta on kestävä ja helposti puhdistettavaa melamiinilevyä
- Lukittavat ovet ja laatikostot
- Ovihyllyt vakiona kaikissa lääkekaappimalleissa
- M1 kaapeissa on narkoottisten aineiden lokero ja lääketarjotin säädettävillä väljakajilla
- LED valo
- Lasihyllyt tai läpinäkyvät muoviset vetolaatikot
- Tukeva putkijalusta säätöjaloilla

Tekniset tiedot

S-MED yhdistelmä lääkekaapit / lääkejääkaapit

Festivo MED			M1 + Festivo MED 80		M1 + Festivo MED 80 GD	
			M1	MED 80	M1	MED 80
Ulkomitat	Leveys	mm	595		595	
	Syvyys	mm	510		510	
	Korkeus	mm	2000		2000	
Sisämitat	Leveys	mm	475	475	475	475
	Syvyys	mm	429	305 / 205	429	305 / 205
	Korkeus	mm	1064	470 / 390	1064	470 / 390
Tilavuus	Netto	litra	166	53	166	53
	Brutto	litra	207	75	207	75
Paino	Netto	kg	105		107	
Pakkauksen paino	Brutto	kg	110		112	
Pakkauksen mitat	Leveys		680		680	
	Syvyys		600		600	
	Korkeus		2170		2170	
Ympäristön lämpötila	°C		+5...+32		+5...+32	
Lämpötila-alue	°C		+2...+15		+2...+15	
Kylmäaine	R600	g	-	42	-	42
Liitäntäteho		W	12	50	12	50
Sulake	Hidas	A	10	10	10	10
Jännite		V	230/ 50/60 Hz	230/ 50/60 Hz	230/ 50/60 Hz	230/ 50/60 Hz
Sulatus 1. Ilma 2. Kuumakaasu 3. Sähkö			-	3	-	3
HYLLYT JA VETOLAATIKOT						
Lasihylly (vakio/maksimi) • leveys 475 mm, syvyys 254 mm		kpl	4/5*	2/3	4/5*	2/3
Lasihylly (vakio/maksimi)** • leveys 475 mm, syvyys 175 mm		kpl	N/A	2/3	N/A	N/A
TAI						
Teräshylly ruostumatonta terästä (vakio/maksimi) • leveys 475 mm, syvyys 260 mm		kpl	N/A	2/3	N/A	2/3
TAI						
Vetolaatikat (vakio/maksimi)*** • sivu 17, leveys 460 mm, syvyys 253 mm		kpl	4/5*	2/3	4/5*	2/3
JA						
Ovihylly vakiona*** • sivu 18, leveys 425 mm, syvyys 90 mm		kpl	4	2	4	N/A

* Huom! Narkoottisten aineiden N-lokeron tilalle voi valita 3 lasihyllyä tai vetolaatikkoa


** Syvyydeltään 175 mm lasihyllyä käytetään lääkejääkaapissa yhdessä ovihyllyn kanssa

*** Kylmäkaappiin ei saa ovihylly-vetolaatikko-yhdistelmää


Tekniset tiedot

S-MED yhdistelmälääkekaapit / lääkejääkaapit

M1 + Festivo MED 80, M1

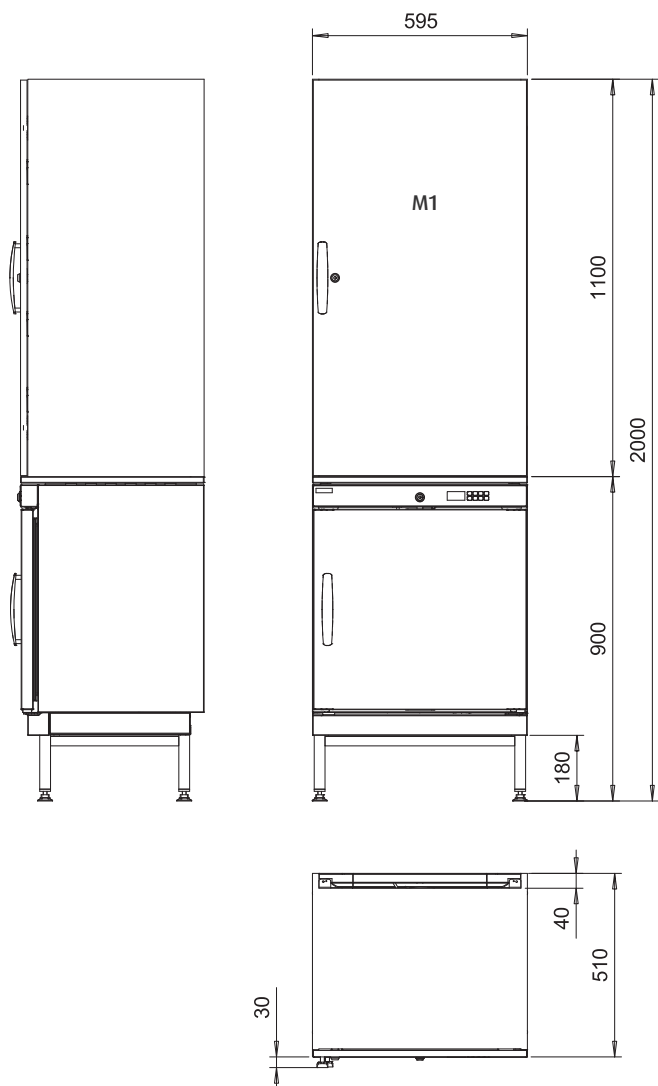

M1 + Festivo MED 80 GD

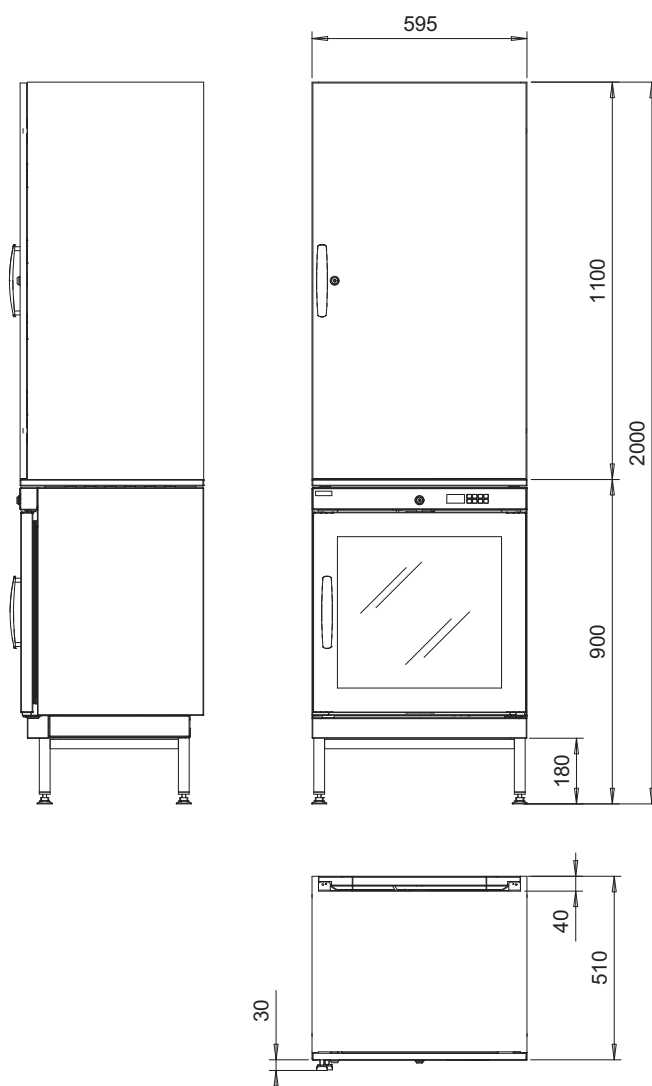

M1 + Festivo MED 80



M1 + Festivo MED 80 (erikoishyllyvarustus)



Festivo M1 Narkoottisten aineiden lokero ja lääketarjotin

Tekniset tiedot

S-MED yhdistelmä lääkekaapit / lääkejääkaapit

Festivo MED			Festivo 80 + NK4/VL8			Festivo 80 GD + NK4/VL8		
			80	NK4	VL8	80 GD	NK4	VL8
Ulkomitat	Leveys	mm	595			595		
	Syvyys	mm	510			510		
	Korkeus	mm	2000			2000		
Sisämitat	Leveys	mm	475	475	475	475	475	475
	Syvyys	mm	305 / 205	429	429	305 / 205	429	429
	Korkeus	mm	470 / 390	1064	1064	470 / 390	1064	1064
Tilavuus	Netto	litra	53	166		53	166	
	Brutto	litra	75	207		75	207	
Paino	Netto	kg	105			107		
Pakkauksen paino	Brutto	kg	110			112		
Pakkauksen mitat	Leveys		680			680		
	Syvyys		600			600		
	Korkeus		2170			2170		
Ympäristön lämpötila	°C		+5...+32	-	-	+5...+32	-	-
Lämpötila-alue	°C		+2...+15	-	-	+2...+15	-	-
Kylmäaine	R600	g	42	-	-	42	-	-
Liitäntäteho		W	50	-	-	50	-	-
Sulake	Hidas	A	10	10	10	10	10	10
Jännite		V	230/ 50/60 Hz	230/ 50/60 Hz	230/ 50/60 Hz	230/ 50/60 Hz	230/ 50/60 Hz	230/ 50/60 Hz
Sulatus 1. Ilma 2. Kuumakaasu 3. Sähkö			3	-	-	3	-	-
HYLLYT JA VETOLAATIKOT								
Lasihylly (vakio/maksimi) • leveys 475 mm, syvyys 254 mm		kpl	2/3	4/8	N/A	2/3	4/8	N/A
Lasihylly (vakio/maksimi) * • leveys 475 mm, syvyys 175 mm		kpl	2/3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TAI								
Teräshylly ruostumatonta terästä (vakio/maksimi) • leveys 475 mm, syvyys 260 mm		kpl	2/3	N/A	N/A	2/3	N/A	N/A
TAI								
Vetolaatikat (vakio/maksimi) • sivu 17, leveys 460 mm, syvyys 253 mm		kpl	2/3	N/A	8/8	2/3	N/A	8/8
JA								
Ovihylly vakiona ** • sivu 18, leveys 425 mm, syvyys 90 mm		kpl	2	4	4	N/A	4	4


* Syvyydeltään 175 mm lasiyllyä käytetään lääkejääkaapissa yhdessä oviyllyn kanssa

** Kylmäkaappiin ei saa oviylly-vetolaatikko-yhdistelmää


Tekniset tiedot

S-MED yhdistelmä lääkekaapit / lääkejääkaapit

Festivo MED 80 + NK4/VL8

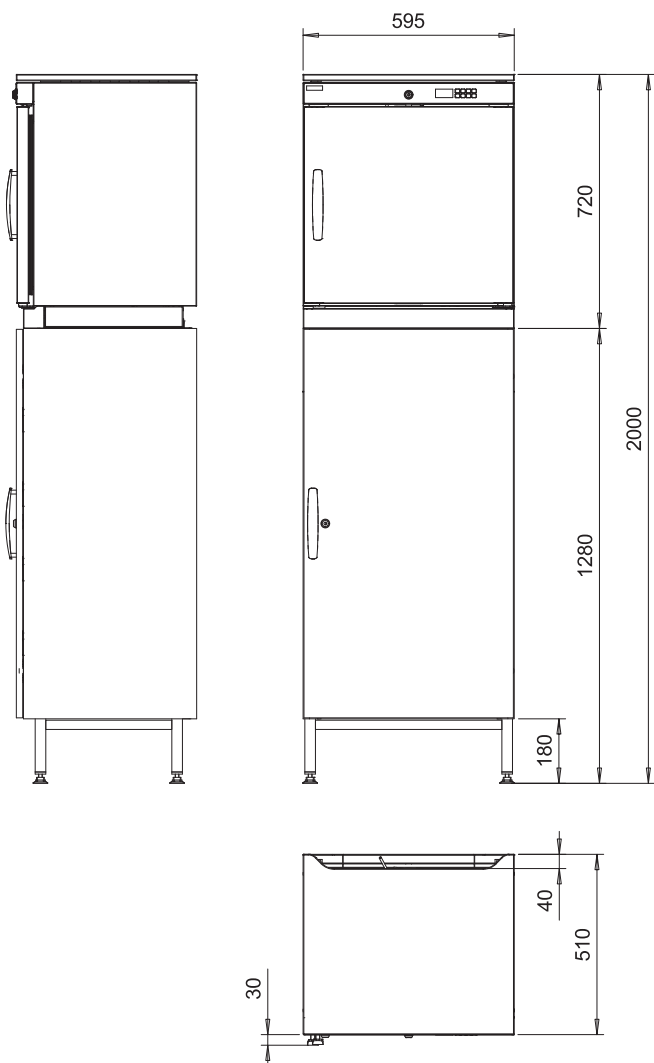

Festivo MED 80 GD + NK4/VL8

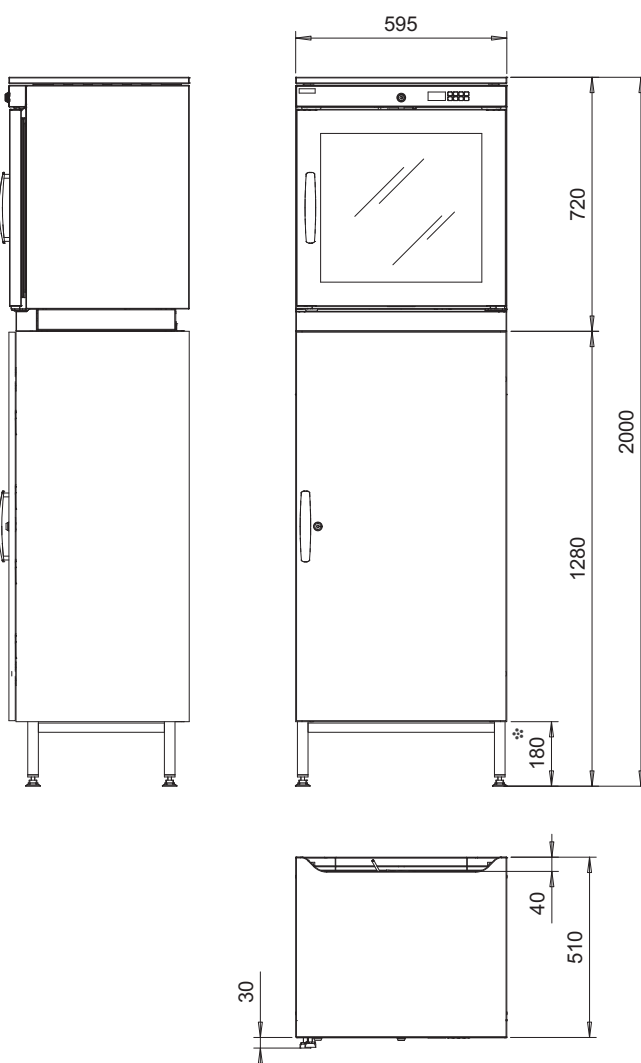

Festivo MED 80 + NK4



Festivo MED 80 + VL8

Tekniset tiedot

S-MED yhdistelmä lääkekaapit / lääkejääkaapit

Festivo MED			NK2 + Festivo MED 200		NK2 + Festivo MED 200 GD	
			NK2	200	NK2	200 GD
Ulkomitat	Leveys	mm	595		595	
	Syvyys	mm	510		510	
	Korkeus	mm	2000		2000	
Sisämitat	Leveys	mm	475	475	475	475
	Syvyys	mm	429	305 / 205	429	305 / 205
	Korkeus	mm	489	1045 / 965	489	1045 / 965
Tilavuus	Netto	litra	72	127	72	127
	Brutto	litra	106	176	106	176
Paino	Netto	kg	101		103	
Pakkauksen paino	Brutto	kg	106		108	
Pakkauksen mitat	Leveys		680		680	
	Syvyys		600		600	
	Korkeus		2170		2170	
Ympäristön lämpötila	°C		-	+5...+32	-	+5...+32
Lämpötila-alue	°C		-	+2...+15	-	+2...+15
Kylmäaine	R600	g	-	55	-	55
Liitäntäteho		W	-	50	-	50
Sulake	Hidas	A	10	10	10	10
Jännite		V	230/ 50/60 Hz	230/ 50/60 Hz	230/ 50/60 Hz	230/ 50/60 Hz
Sulatus 1. Ilma 2. Kuumakaasu 3. Sähkö			-	3	-	3
HYLLYT JA VETOLAATIKOT						
Lasihyllly (vakio/maksimi) • leveys 475 mm, syvyys 254 mm		kpl	2/4	5/8	2/4	5/8
Lasihyllly (vakio/maksimi) * • leveys 475 mm, syvyys 175 mm		kpl	N/A	5/8	N/A	N/A
TAI						
Teräshyllly ruostumatonta terästä (vakio/maksimi) • leveys 475 mm, syvyys 260 mm		kpl	N/A	5/8	N/A	5/8
TAI						
Vetolaatikat (vakio/maksimi) ** • sivu 17, leveys 460 mm, syvyys 253 mm		kpl	N/A	5/8	N/A	5/8
JA						
Ovihyllly vakiona ** • sivu 18, leveys 425 mm, syvyys 90 mm		kpl	2	5	2	N/A


* Syvyydeltään 175 mm lasihylllyä käytetään lääkejääkaapissa yhdessä ovihylllyn kanssa

** Kylmäkaappiin ei saa ovihyllly-vetolaatikko-yhdistelmää


Tekniset tiedot

S-MED yhdistelmälääkekaapit / lääkejääkaapit

NK2 + Festivo MED 200

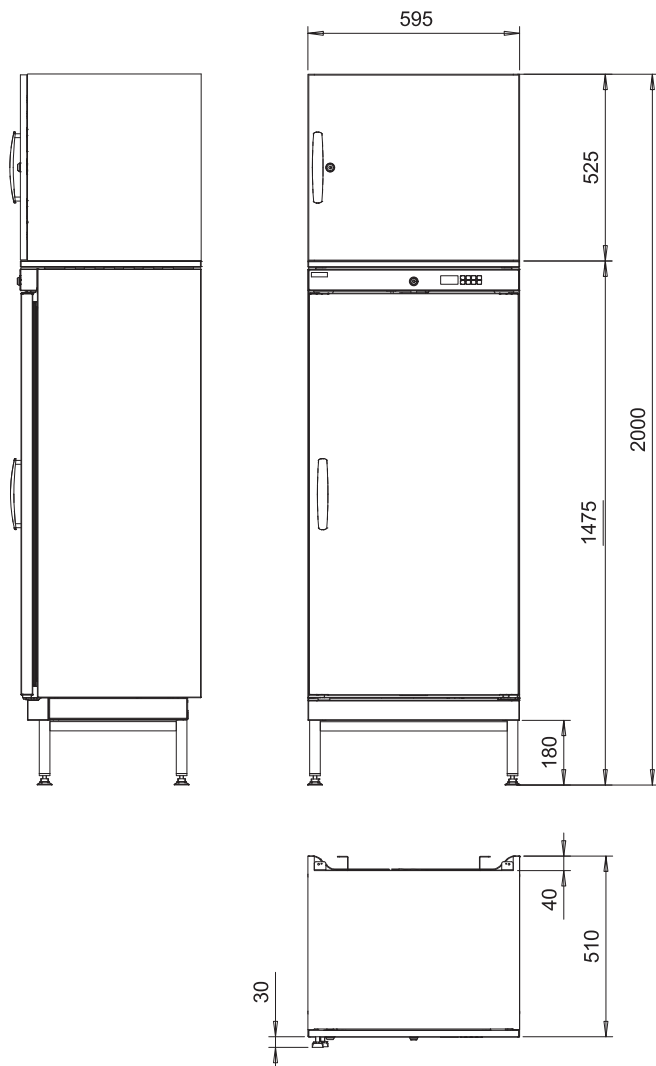

NK2 + Festivo MED 200 GD

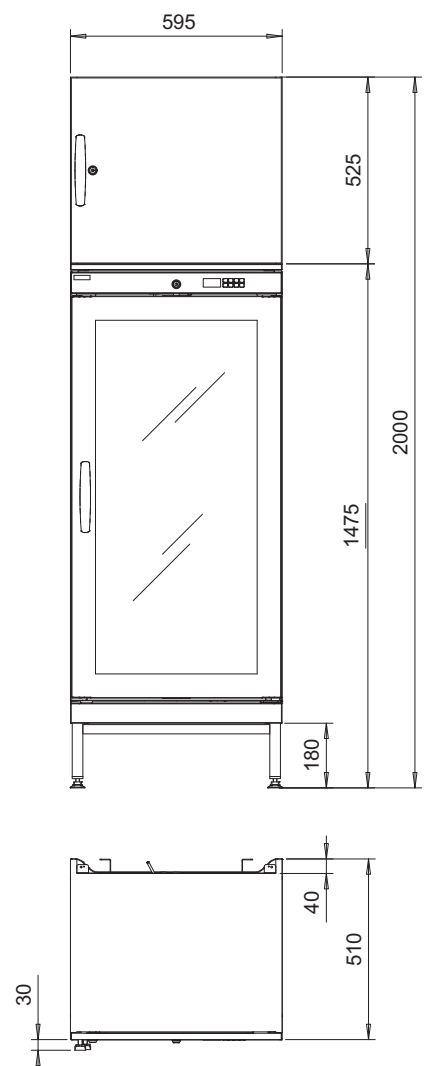

NK2 + Festivo MED 200

Tekniset tiedot

S-MED yhdistelmä lääkekaapit / lääkejääkaapit

Festivo MED			Festivo MED 200 + NK2/VL4			Festivo MED 200 GD + NK2/VL4		
			200	NK2	VL4	200 GD	NK2	VL4
Ulkomitat	Leveys	mm	595			595		
	Syvyys	mm	510			510		
	Korkeus	mm	2000			2000		
Sisämitat	Leveys	mm	475	475		475	475	
	Syvyys	mm	305 / 205	429		305 / 205	429	
	Korkeus	mm	1045 / 965	489		1045 / 965	489	
Tilavuus	Netto	litra	127	72		127	72	
	Brutto	litra	176	106		176	106	
Paino	Netto	kg	101			103		
Pakkauksen paino	Brutto	kg	106			108		
Pakkauksen mitat	Leveys		680			680		
	Syvyys		600			600		
	Korkeus		2170			2170		
Ympäristön lämpötila	°C		+5...+32	-		+5...+32	-	
Lämpötila-alue	°C		+2...+15	-		+2...+15	-	
Kylmäaine	R600	g	55	-		55	-	
Liitäntäteho		W	50	-		50	-	
Sulake	Hidas	A	10	10		10	10	
Jännite		V	230/ 50/60 Hz			230/ 50/60 Hz		
Sulatus 1. Ilma 2. Kuumakaasu 3. Sähkö			3	-		3	-	
HYLLYT JA VETOLAATIKOT								
Lasihyllly (vakio/maksimi) • leveys 475 mm, syvyys 254 mm		kpl	5/8	2/4	N/A	5/8	2/4	N/A
Lasihyllly (vakio/maksimi) * • leveys 475 mm, syvyys 175 mm		kpl	5/8	N/A	N/A	5/8	N/A	N/A
TAI								
Teräshyllly ruostumatonta terästä (vakio/maksimi) • leveys 475 mm, syvyys 260 mm		kpl	5/8	N/A	N/A	5/8	N/A	N/A
TAI								
Vetolaatikot (vakio/maksimi) ** • sivu 17, leveys 460 mm, syvyys 253 mm		kpl	5/8	N/A	4/4	5/8	N/A	4/4
JA								
Ovihyllly vakiona ** • sivu 18, leveys 425 mm, syvyys 90 mm		kpl	5	2	2	N/A	2	2


* Syvyydeltään 175 mm lasihylllyä käytetään lääjäkäapissa yhdessä ovihyllyn kanssa

** Kylmäkaappiin ei saa ovihyllly-vetolaatikko-yhdistelmää


Tekniset tiedot

S-MED yhdistelmälääkekaapit / lääkejääkaapit

Festivo MED 200 + NK2/VL4

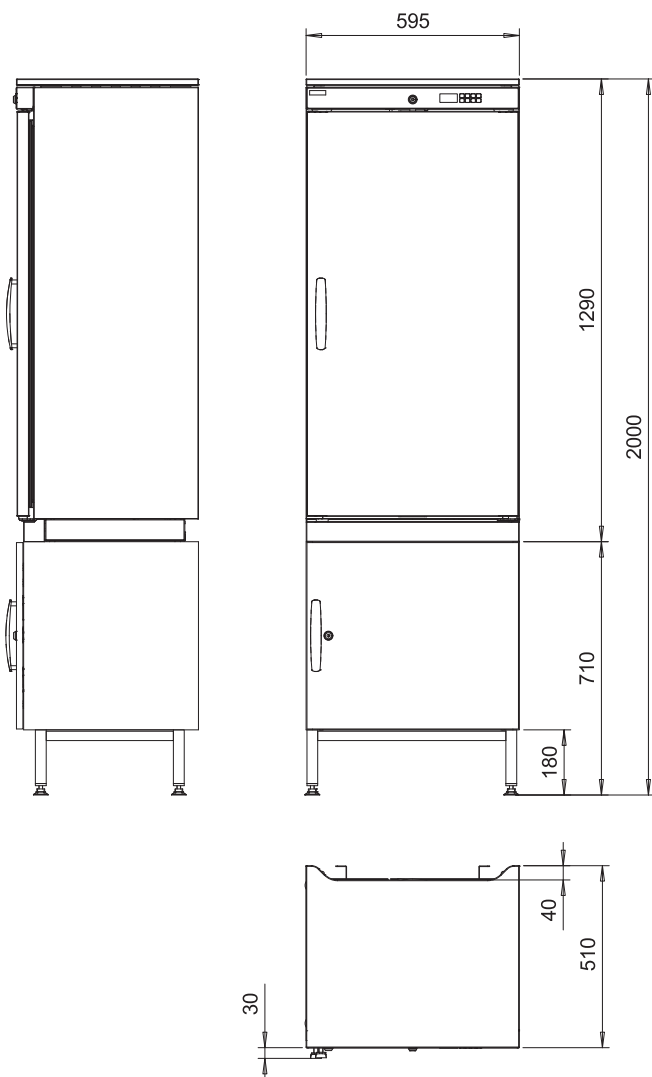

Festivo MED 200 GD + NK2/VL4

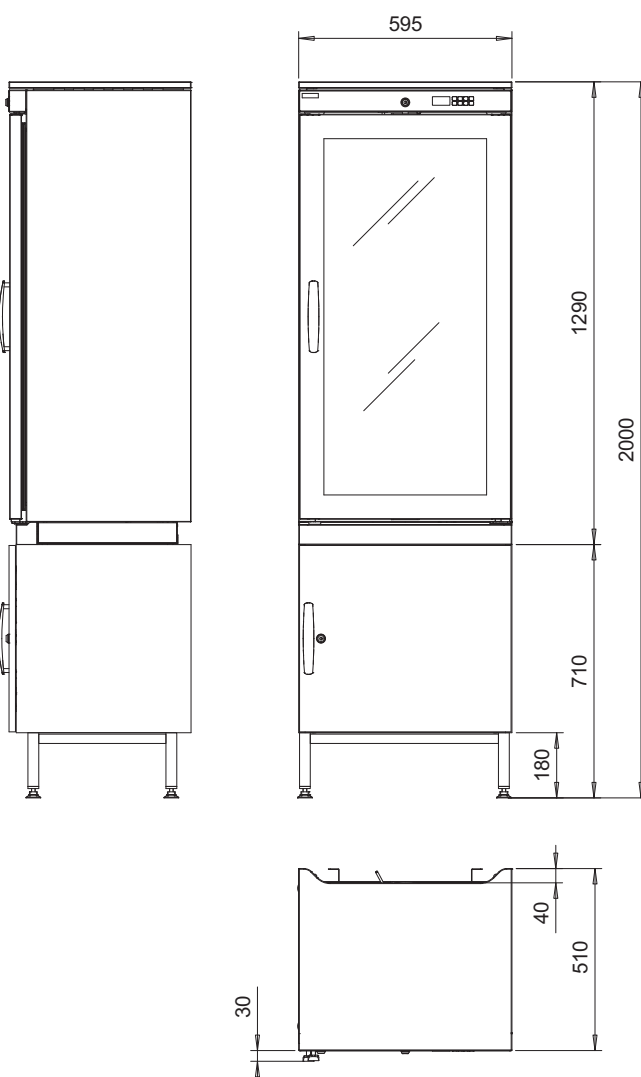

Festivo MED 200 + NK2



Festivo MED 200 + VL4

Tekniset tiedot

Festivo LAB kipinäsuojatut laboratorikylmäkaapit

Kaapeissa käytetään energiatehokasta ja ympäristöystävällistä R600 kylmäainetta.

Kaapin turvahälytykset varmistavat lämpötilaherkkien tuotteiden säilytyksen.

Puhaltimella tehostettu ilmankierto takaa tasaisen säilytyslämpötilan.

Kaapin muotoilua ja rakennetta on uudistettu sekä ulko- että sisäpuolelta ja sen avulla on saavutettu suurempi ja entistä paremmin hyödynnettävä kylmäsäilytystila.

Uutena lisätarvikkeena on muovinen vetolaatikko-järjestelmä. Mallista riippuen kaappiin mahtuu 2-8 vetolaatikkoo.

Kaikki pinnat ovat helposti puhdistettavia.

Lukkovaihtoehtoina ovat Assa, Abloy, iLOQ ja Ruko. Lukko on kiinnitetty käytännölliselle korkeudelle kaapin yläreunaan.



Ominaisuudet

- Ohjausyksikkö, jossa on selkeä numeronäyttö lämpötilalle ja muille toiminnoille
- Näppäinlukitus
- Minimi- ja maksimilämpötilan tallennus
- Optinen ja akustinen ylä- ja alalämpötilahälytys
- Ovikytin puhaltimen ohjaukselle sekä ovi auki -hälytykselle
- Hälytys rikkoutuneesta anturista
- Valmius RS485 sovitteelle tietokoneliitännää varten
- Puhaltimella tehostettu ilmankierto
- Muottiin valettu ympäristöystävällinen polyuretaanieristeinen runko. Eristepaksuus on 50mm.
- Ulkopinta on näkyviltä osiltaan valkoista POES-pintaista kuumasinkittyä teräslevyä.
- Sisäpinnat ovat ruostumatonta teräslevyä.
- Kaapin sisälle asennettu hygieninen vesisäiliö, johon kertyy kylmät patterin pintaan tiivistynyt vesi
- Hyllyjen säätöväli on 36 mm.
- Abloy lukko on yläpaneelissa.
- Itsesulkeutuvassa ovesta on tukeva valettu vedin, magneettitiivistä ja kestävä saranat. Ovi pysyy auki 90 asteen kulmassa.
- Kaapeissa on energiatehokas ja ympäristöystävällinen R600 kylmäaineella toimiva kylmäkoneisto.
- Sähköliitäntä 230V / 50/60Hz

Lisävarusteet

- Muovinen vetolaatikko, jossa on väljakajia
- Lukkovaihtoehdot: Assa, iLOQ, Ruko
- Potentiaalivapaa kytkentäpaikka hälytyksille
- Läpivienti lisäanturille
- Putkijalusta h=180mm
- Kuumakaasuhaihdutusjärjestelmä, joka haihduttaa kylmät patterin pintaan tiivistyneen veden

Tekniset tiedot

Festivo LAB kipinäsuojatut laboratorioskylmäkaapit



- Energiatehokas ja ympäristöystävällinen kylmäkoneisto
- Puhaltimella tehostettu ilmankierto
- Turvahälytyksillä varmistettu kylmäkoneisto
- Ohjausyksikkö, jossa on selkeä numeronäyttö lämpötilalle ja muille toiminnoille
- Lukko on kiinnitetty käytännölliselle korkeudelle kaapin yläreunaan
- Itsesulkeutuva ovi pysyy auki 90 asteen kulmassa

Tekniset tiedot

Festivo LAB kipinäsuojatut laboratorio kylmäkaapit

Festivo LAB			80	200	320	
					ILÄOSA	ALAOSA
Ulkomitat	Leveys	mm	595	595	595	
	Syvyys	mm	510	510	510	
Lattia-/pöytämalli	Korkeus	mm	725	1300	2000	
Pöytätason alle sijoitettava jalustallinen malli * **	Korkeus	mm	870	-	-	
Seinään tai kalusteisiin sijoitettava malli **	Korkeus	mm	750	-	-	
Sisämitat	Leveys	mm	495	495	495	
	Syvyys	mm	305 / 205	305 / 205	305	305 / 205
	Korkeus	mm	470 / 390	1045 / 965	825	820 / 740
Tilavuus	Netto	litra	45	118	187	
	Brutto	litra	77	181	305	
Paino	Netto	kg	49	72	109	
Pakkauksen paino	Brutto	kg	52	77	114	
Pakkauksen mitat	Leveys		680	680	680	
	Syvyys		600	600	600	
	Korkeus		920	1470	2170	
Ympäristön lämpötila		°C	+5...+32	+5...+32	+5...+32	
Lämpötila-alue		°C	+2...+15	+2...+15	+2...+15	
Kylmäaine	R600	g	42	55	2 x 50	
Liitäntäteho		W	50	50	100	
Sulake	Hidas	A	10	10	10	
Jännite		V	230/ 50/60 Hz	230/ 50/60 Hz	230/ 50/60 Hz	
Sulatus 1. Ilma 2. Kuumakaasu 3. Sähkö			3	3	3	
HYLLYT JA VETOLAATIKOT						
Ruostumaton teräshylly						
Määrä vakio/maksimi		kpl	2/3	5/8	4/6	4/6
• leveys 475 mm, syvyys 260 mm						
TAI						
Vetolaatikat						
Määrä vakio/maksimi		kpl	2/3	5/8	2/4***	4/6
• leveys 460 mm, syvyys 253 mm						

* Kalusteasennuksissa työtasoon pitää tehdä kaapin takareunan kohdalle ilmankiertoaukko tai kaapin päälle pitää jättää ilmankiertotila, josta lauhdeilma pääsee vapaasti ympäristöön. Katso lisäohjeet tuotteen teknisistä tiedoista.


** Pöytätason alle ja seinään tai kalusteisiin sijoitettavan mallin kansilevy on sinkittyä teräslevyä.

*** 320 yläosa: vetolaatikoiden kanssa toimitetaan aina vakiona 2 kpl ruostumattomia teräshyllyjä (leveys 470 mm, syvyys 254 mm)

Tekniset tiedot

Festivo LAB kipinäsuojaatut laboratorio kylmäkaapit


Festivo LAB 80

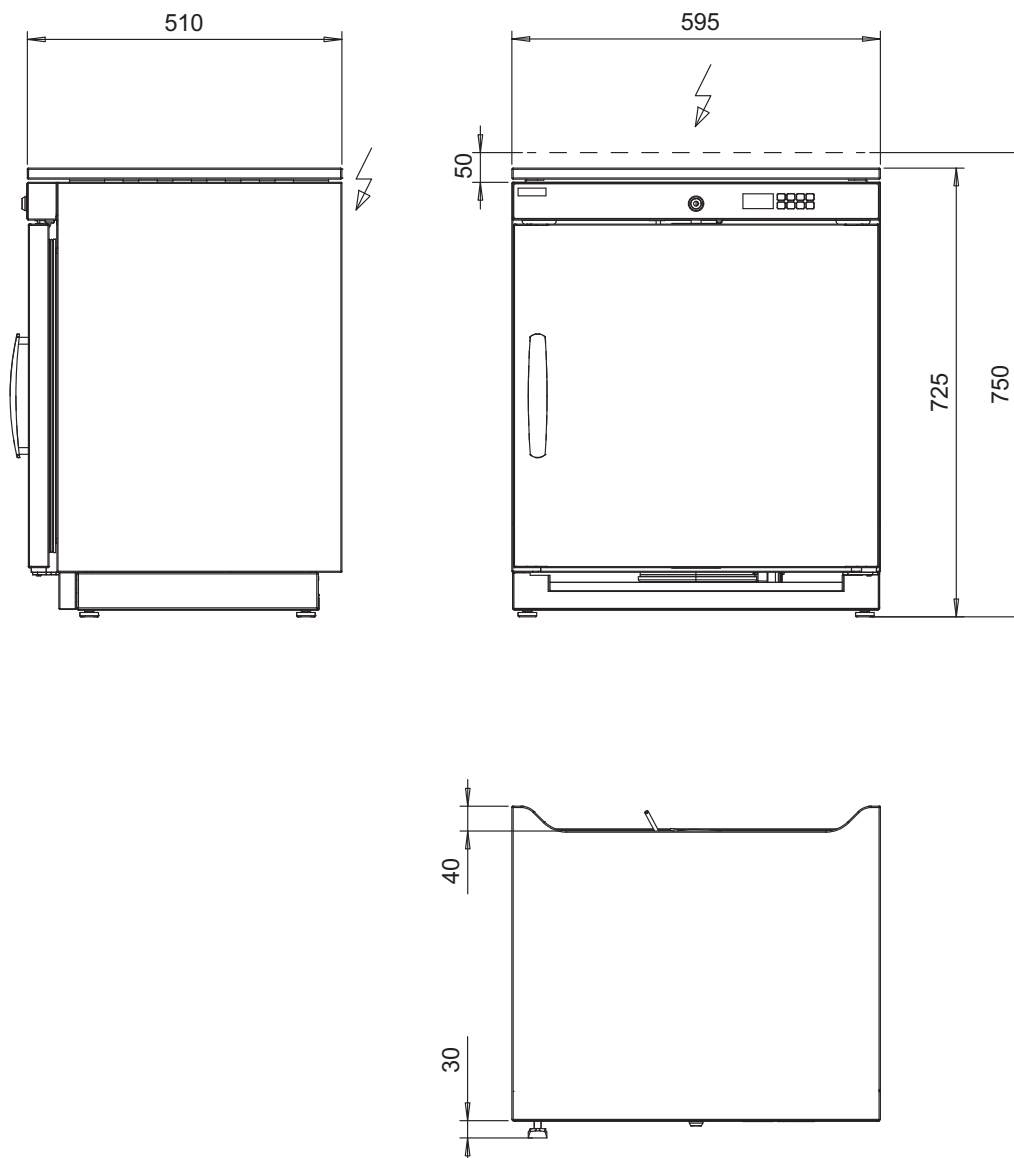

Tekniset tiedot

Festivo LAB kipinäsuojatut laboratorio kylmäkaapit



Festivo LAB 80

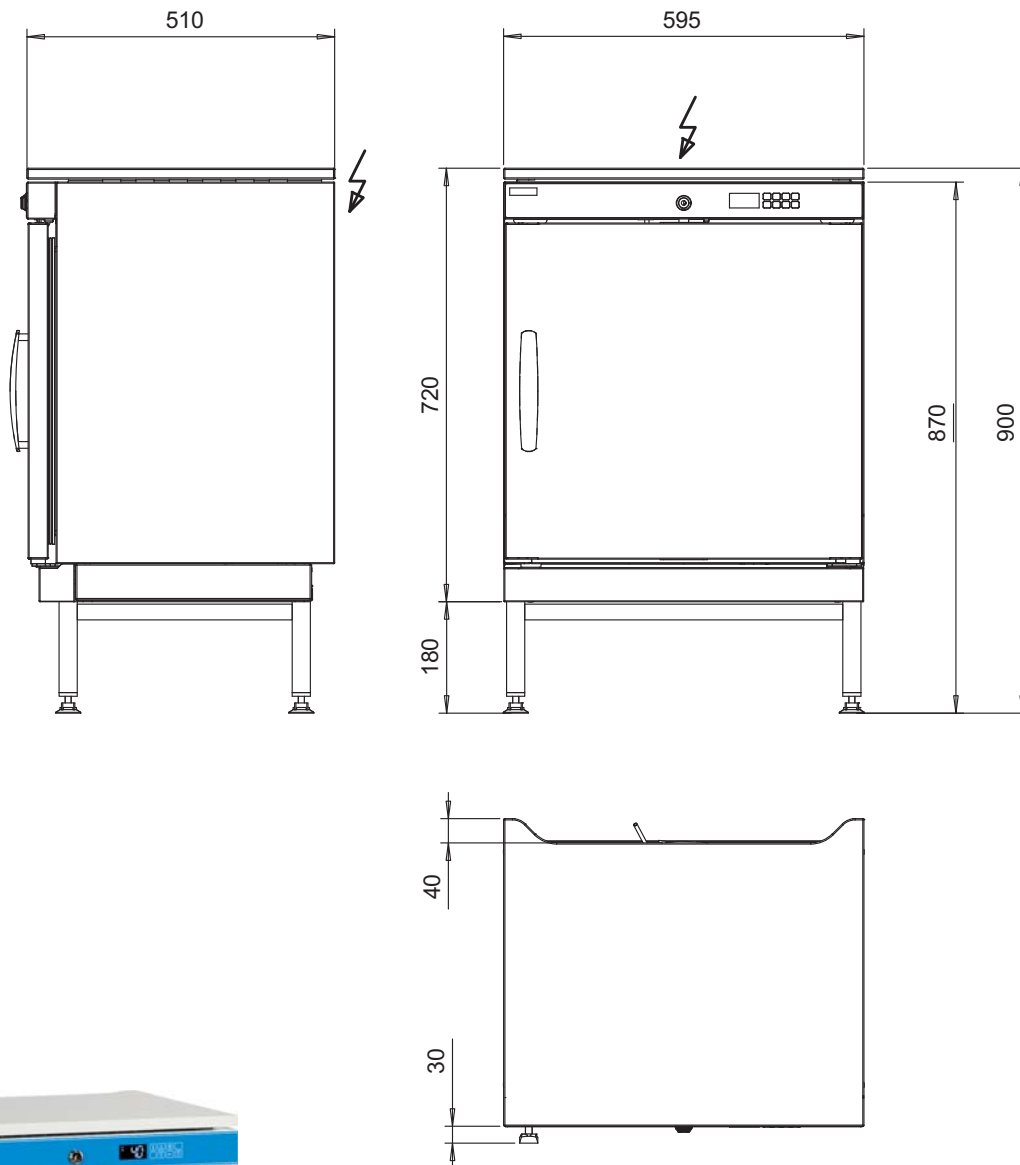

Tekniset tiedot

Festivo LAB kipinäsuojaatut laboratorioskylmäkaapit




Festivo LAB 200

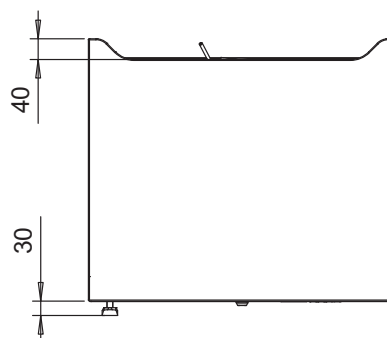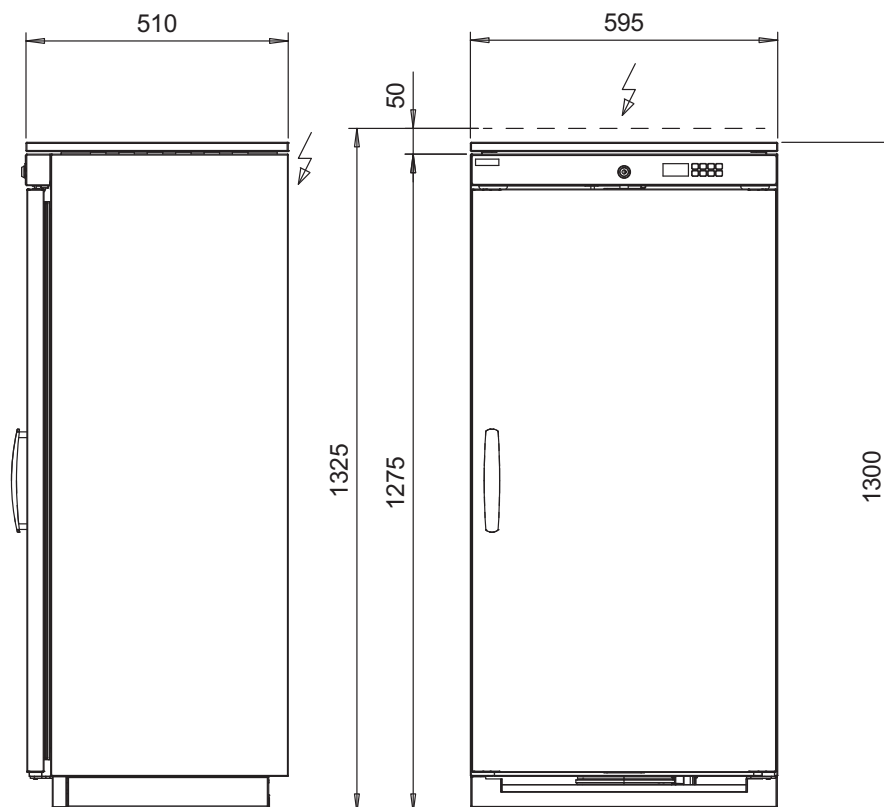

Tekniset tiedot

Festivo LAB kipinäsuojatut laboratorio kylmäkaapit

Festivo LAB 320

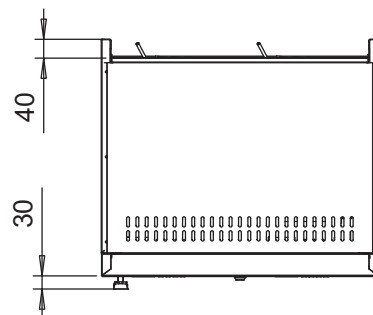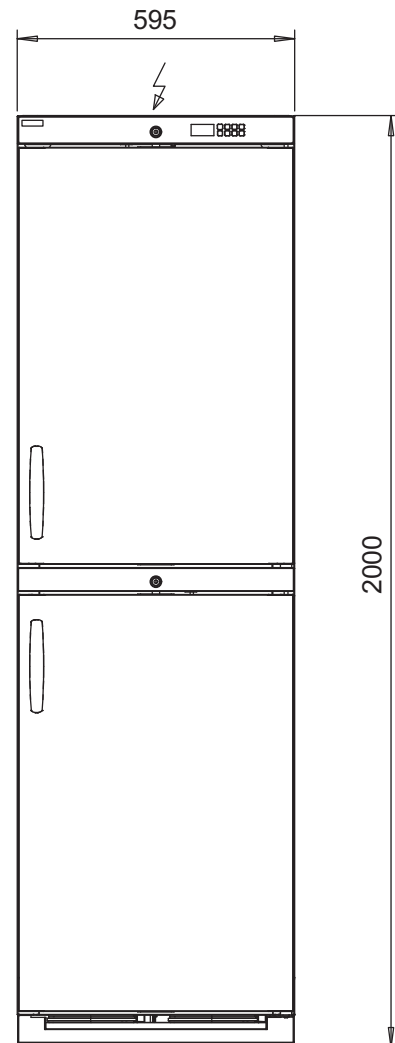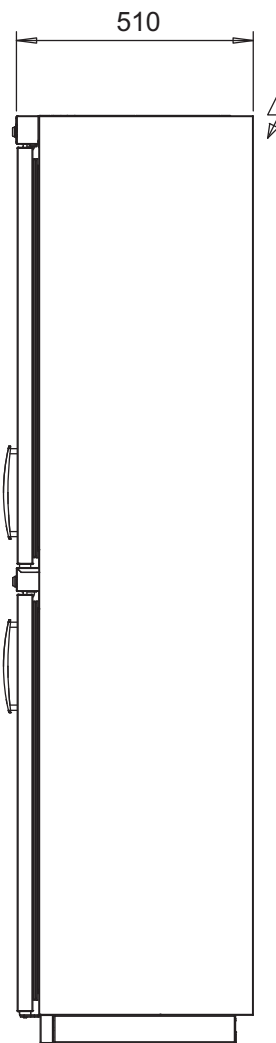

Tekniset tiedot

Festivo LAB lasiovelliset kipinäsuojatut laboratorioskylmäkaapit

Festivo LAB			80 GD	200 GD	320 GD	
					ALAOSA	YLÄOSA
Ulkomitat	Leveys	mm	595	595	595	
	Syvyys	mm	510	510	510	
Lattia-/pöytämalli	Korkeus	mm	725	1300	2000	
Pöytätason alle sijoitettava jalustallinen malli * **	Korkeus	mm	870	-	-	
Seinään tai kalusteisiin sijoitettava malli **	Korkeus	mm	750	-	-	
Sisämitat	Leveys	mm	495	495	495	
	Syvyys	mm	305 / 205	305 / 205	305	305 / 205
	Korkeus	mm	470 / 390	1045 / 965	825	820 / 740
Tilavuus	Netto	litra	45	118	187	
	Brutto	litra	77	181	305	
Paino	Netto	kg	49	72	109	
Pakkauksen paino	Brutto	kg	52	77	114	
Pakkauksen mitat	Leveys		680	680	680	
	Syvyys		600	600	600	
	Korkeus		920	1470	2170	
Ympäristön lämpötila		°C	+5...+32	+5...+32	+5...+32	
Lämpötila-alue		°C	+2...+15	+2...+15	+2...+15	
Kylmäaine	R600	g	42	55	2 x 50	
Liitäntäteho		W	50	50	100	
Sulake	Hidas	A	10	10	10	
Jännite		V	230/ 50/60 Hz	230/ 50/60 Hz	230/ 50/60 Hz	
Sulatus 1. Ilma 2. Kuumakaasu 3. Sähkö			3	3	3	
HYLLYT JA VETOLAATIKOT						
Ruostumaton teräshylly Määrä vakio/maksimi • leveys 475 mm, syvyys 260 mm		kpl	2/3	5/8	4/6	4/6
TAI						
Vetolaatikot Määrä vakio/maksimi • leveys 460 mm, syvyys 253 mm		kpl	2/3	5/8	2/4 ***	4/6

* Kalusteasennuksissa työtasoon pitää tehdä kaapin takareunan kohdalle ilmankiertoaukko tai kaapin päälle pitää jättää ilmankiertotila, josta lauhdeilma pääsee vapaasti ympäristöön. Katso lisäohjeet tuotteen teknisistä tiedoista.


** Pöytätason alle ja seinään tai kalusteisiin sijoitettavan mallin kansilevy on sinkittyä teräslevyä.

*** 320 yläosa: vetolaatikoiden kanssa toimitetaan aina vakiona 2 kpl ruostumattomia teräshyllyjä (leveys 470 mm, syvyys 254 mm)

Tekniset tiedot

Festivo LAB lasiovelliset kipinäsuojatut laboratorionkylmäkaapit


Festivo LAB 80 GD

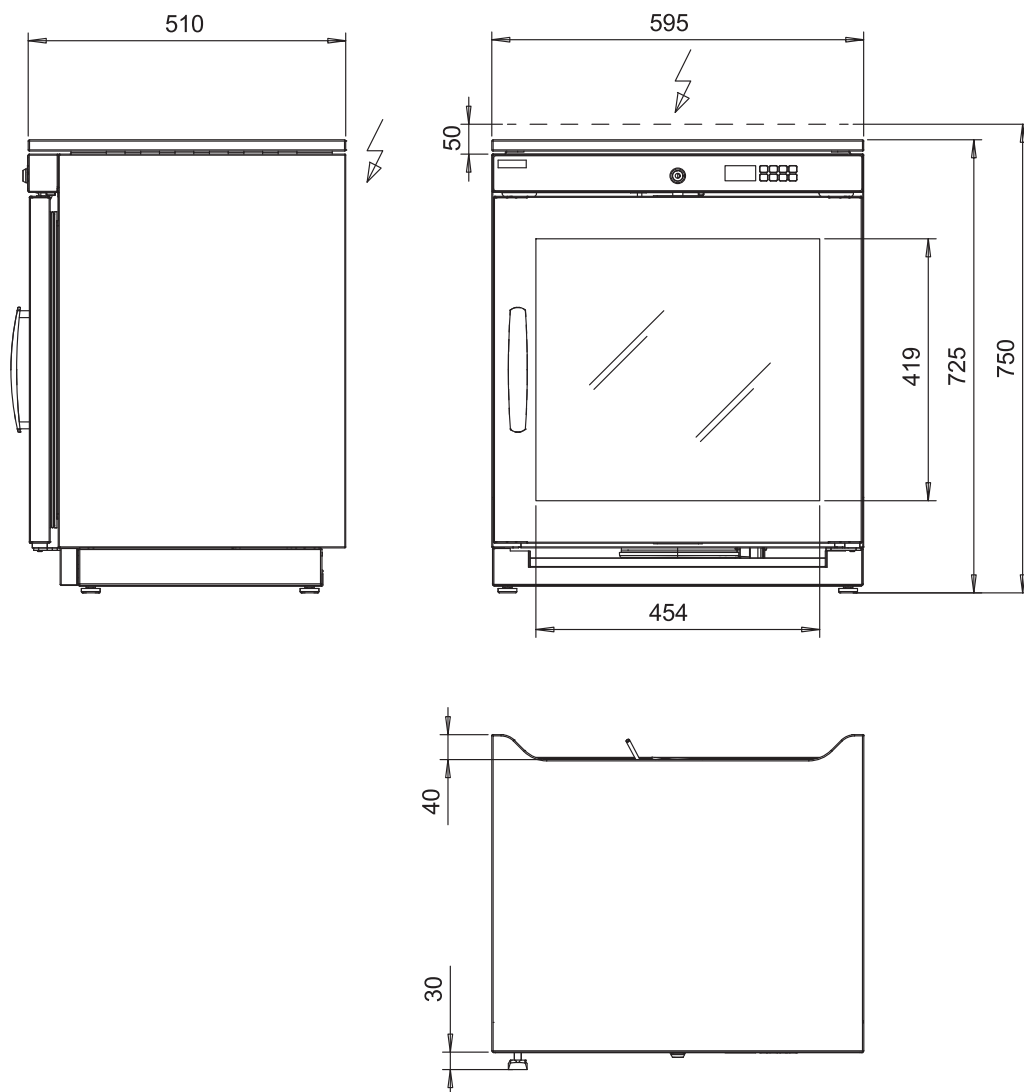

Tekniset tiedot

Festivo LAB lasiovelliset kipinäsuojatut laboratorio kylmäkaapit


Festivo LAB 80 GD

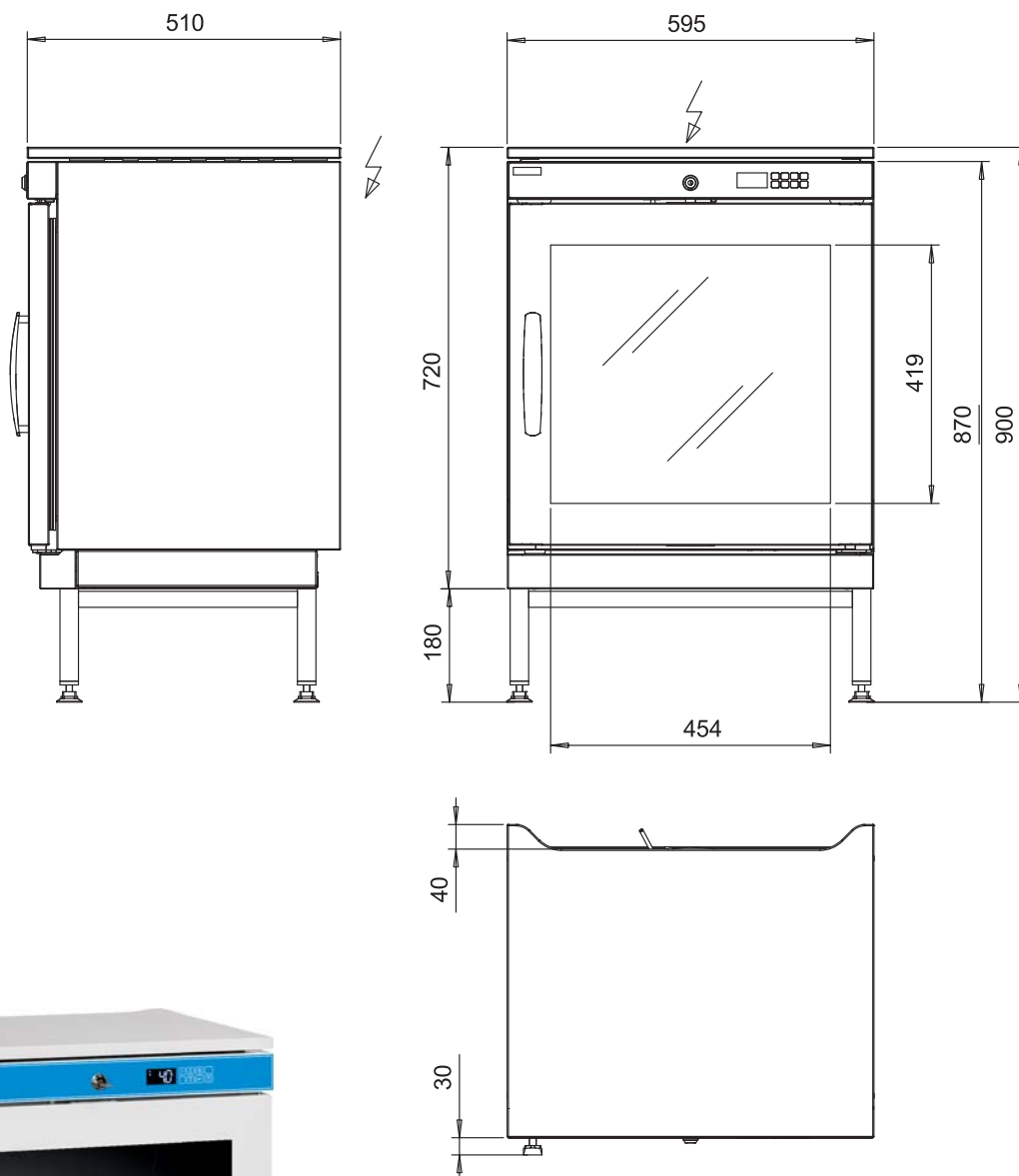

Tekniset tiedot

Festivo LAB lasiovelliset kipinäsuojatut laboratorionkylmäkaapit


Festivo LAB 200 GD

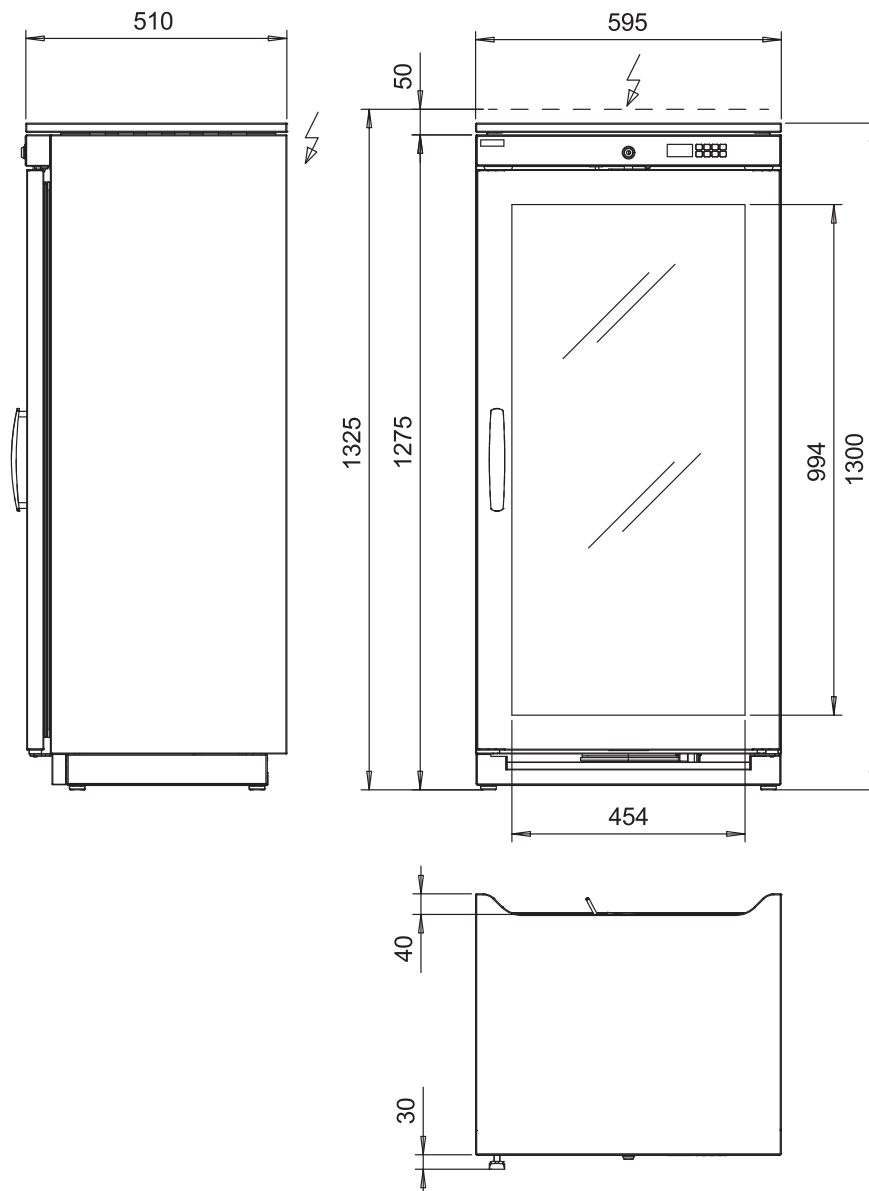

Tekniset tiedot

Festivo LAB lasiovelliset kipinäsuojatut laboratorikyymäkaapit

Festivo LAB 320 GD

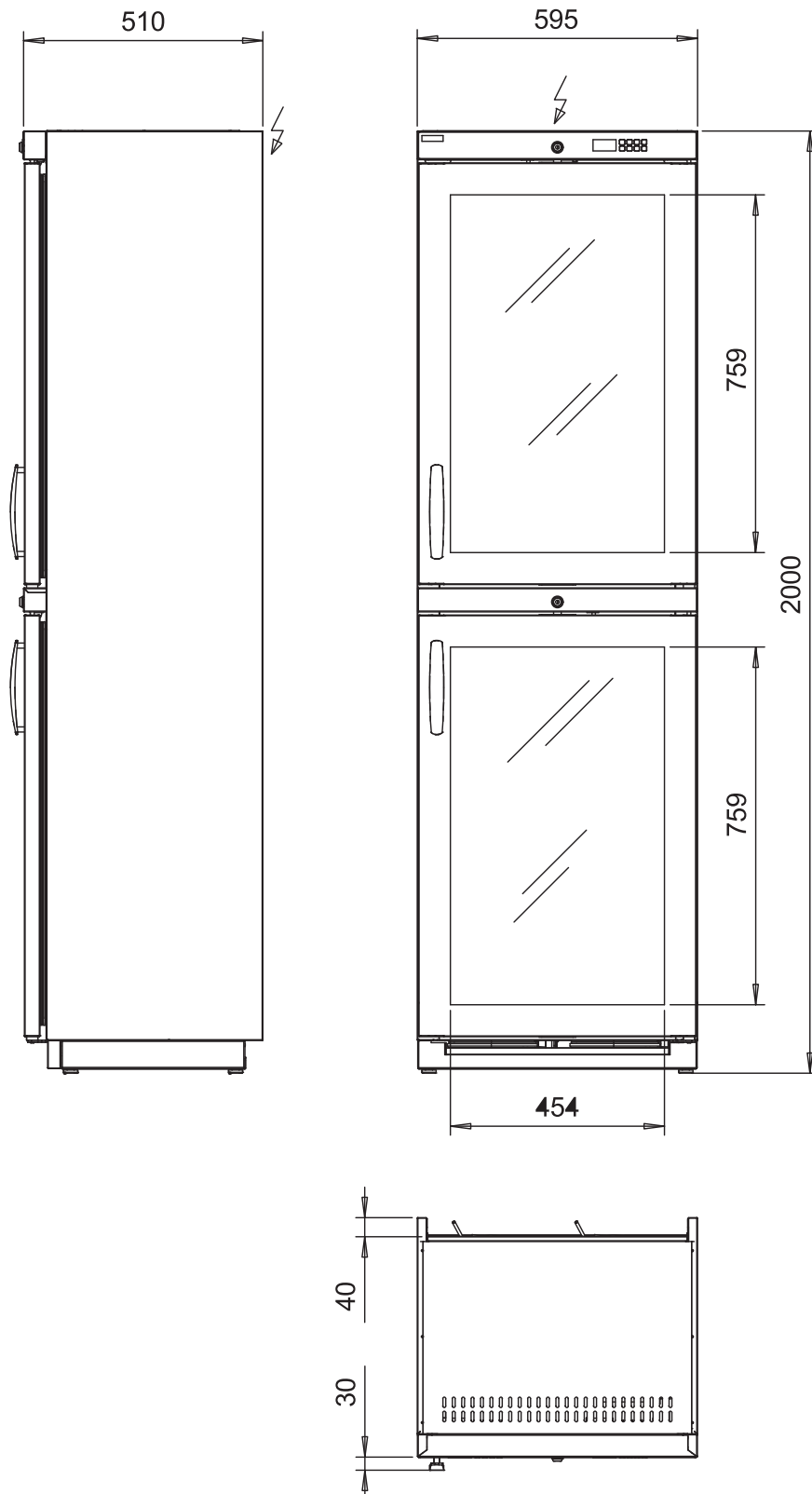

Tekniset tiedot

S-MED lääkejääkaapit

Tekniset tiedot

S-MED lääkejääkaapit

FESTIVO MEDLAB

Kaikki Festivo-tuotteet valmistetaan Hollolassa, jossa sijaitsee Suomen Kotikylmiö Oy:n tehdas, tuotekehitys, hallinto, näyttelytila sekä tehtaan oma huolto- ja varaosapalvelu.

Festivo on aito kotimainen avainlipputuote. Festivo-tunnus kylmälaitteesi etupaneelissa on siis lupaus suomalaisesta laadusta, joka syntyy vuosikymmenten kokemuksesta, vahvoista materiaaleista sekä ajan myötä toimiviksi havaituista rakenteista ja ratkaisuista.

Suomen Kotikylmiö Oy
Ravitie 3, 15860 Hollola
Puh. (03) 553 8600
Fax (03) 553 8668
festivo@festivo.fi

Festivo Huolto
Puh. (03) 553 8681
Puh. (03) 553 8600
Fax (03) 553 8685
service@festivo.fi